



МАССАЖЕР
ДЛЯ ГЛАЗ

IVENT

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажера для глаз **Ivent**. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед применением массажера, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

Введение

Разработанный на основе инженерно-технических знаний и исследований физиологии массажа, интеллектуальный массажер для глаз Bodo Ivent применяется для массирования зоны глаз и висков, используя воздушно-компрессионный и вибрационный массаж, а также инфракрасный прогрев для снятия усталости и физического и психологического расслабления.

Релакс-мелодии массажера, проигрываемые при сеансе, помогут получить пользу и максимальный эффект от массажа. Массажер для глаз Ivent — ваш маленький помощник по уходу за глазами и областью вокруг глаз. Он будет полезен школьникам, студентам, автолюбителям, и всем, чья профессия связана с высокой зрительной нагрузкой, а также тем, кто хочет сохранить красоту и здоровье своих глаз.

Эргономичный, стильный и современный массажер работает от встроенного аккумулятора, компактно складывается и очень мобилен, что позволяет наслаждаться сеансами массажа в любое время и любом удобном для вас месте.

Требования техники безопасности

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте все требования техники безопасности, чтобы убедиться в правильности эксплуатации массажера!

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажера в следующих случаях:

- ✓ имеются заболевания органов зрения или другие проблемы со зрением
- ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
- ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца и повышенным кровяным давлением
- ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
- ✓ беременны или недавно родили
- ✓ имеются злокачественные опухоли
- ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
- ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела

Перед использованием массажера необходимо снять очки или контактные линзы.

Массажер снабжен функцией прогрева, поэтому особое внимание при его работе следует уделять людям с повышенным или с полным отсутствием чувствительности тела.

Массажер для глаз предназначен только для взрослых. Использование массажера лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.

Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с врачом.

Запрещается использовать массажер после перенесенных операций на глазах, при глаукоме, катаракте или отслоении сетчатки.

Запрещается использовать массажер в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная комната, душевая и др.), повышенной температурой, в сильно запыленных местах и местах с высоким электромагнитным излучением.

Запрещается использование массажера, если он

поврежден, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.

Запрещается самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство массажера.

Комплектация

- 1.** Массажер для глаз — 1шт
- 2.** USB-кабель — 1шт
- 3.** Сетевое зарядное устройство USB-адаптер — 1шт
- 4.** Чехол для хранения — 1шт
- 5.** Съёмная моющаяся ткань — 1шт
- 6.** Руководство пользователя — 1шт

Спецификация


Наименование продукта: массажер для глаз

Модель: Ivent

Напряжение: 5В, 1А / 5Вт

Батарея: 3.7В, 1450мАч

Описание

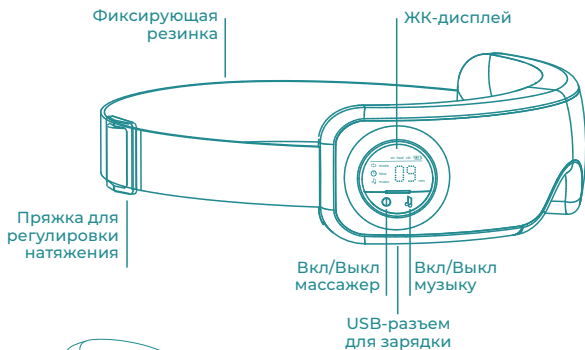

Закачать музыку или зарядить аккумулятор

Кнопки

-  — включает массажер, изменяет режимы работы, долгое нажатие выключает массажер
-  — управление музыкой

Значки

-  — индикатор работы массажера
-  — таймер
-  — проигрывание музыки
-  — индикатор заряда аккумулятора
- air** — запущена функция воздушно-компрессионного массажа
- heat** — запущена функция прогрева
- vib.** — запущена функция вибромассажа

Программы и функции

Нажмите  чтобы включить массажер, загорится экран ЖК-дисплея и по умолчанию запустится 1-й режим работы длительностью 15 минут, включающий воздушно-компрессионный массаж и нагрев.

Коротко нажимайте  для переключения между 5-ю режимами работы массажера, имеющих настройки:

Режим 1: воздушно-компрессионный массаж + прогрев

Режим 2: воздушно-компрессионный массаж + прогрев + вибромассаж

Режим 3: воздушно-компрессионный массаж + вибромассаж

Режим 4: воздушно-компрессионный массаж

Режим 5: прогрев

Нажмите и удерживайте  в течение 2-х секунд чтобы выключить массажер и все его функции.

Аудиотерапия

нажмите и удерживайте 2-3 секунды  чтобы включить или выключить проигрывание мелодий
во время проигрывания нажмите  чтобы перейти к следующей мелодии

во время проигрывания дважды нажмите  чтобы отрегулировать громкость

По умолчанию уровень громкости высокий. Переключение уровня громкости осуществляется в последовательности низкий, средний, высокий.

Вы можете загрузить свои любимые мелодии, подключив массажер к компьютеру, используя USB-кабель. Устройство поддерживает музыкальные файлы только в формате MP3.

Примечание: массажер приостанавливает все свои функции при подключении к компьютеру.

- воздушно-компрессионный массаж выполняется путем деликатного надавливания воздушных подушек на виски и область вокруг глаз наполняющимися воздухом подушками
- вибрационный массаж - это воздействие на акупунктурные точки области глаз путем механических колебаний
- ИК-прогрев очень приятен и имеет согревающий эффект вокруг глаз и висков
- аудиотерапия создаст приятную атмосферу легкости, безмятежности и покоя, благодаря встроенным мелодиям

- массаж висков и других акупунктурных точек области глаз, благодаря комбинации массажных воздействий воздушными подушками, вибраций и ИК-прогрева, улучшит кровообращение, поможет уменьшить темные круги под глазами, отечность, избавиться от ощущения сухости глаз
- складывающаяся конструкция позволит компактно хранить и носить массажер с собой. В комплекте удобный чехол для хранения.
- управление одной кнопкой простое и интуитивно понятное
- ЖК-дисплей с яркой подсветкой
- съемная моющаяся ткань позволит легко ухаживать за этой частью массажера, обеспечивая его гигиеничное использование

Подготовка к эксплуатации

Коротким нажатием кнопки  включите массажер и проверьте уровень заряда встроенного аккумулятора. Если индикатор заряда на дисплее пустой или моргает, зарядите массажер с помощью USB-кабеля, подключенного к компьютеру или к сетевому зарядному устройству. Рекомендуется использовать массажер после полной зарядки аккумулятора.

Прикрепите съемную моющуюся ткань к внутренней части массажера, используя три липучки для фиксации ткани. Снимите головной убор и очки перед использованием. Приложите массажер к глазам и зафиксируйте его на голове с помощью резинки, отрегулировав ее в удобное положение.

Уход и хранение

Перед чисткой массажера убедитесь, что он выключен и отсутствует подключение к адаптеру или компьютеру через USB-кабель.

Для чистки используйте мягкую ткань, смочите ее в воде, хорошо отожмите и протрите массажер.

Съемную ткань на липучках нужно аккуратно постирать вручную в теплой воде. Не используйте фен, функцию сушки белья стиральной машины, не отжимайте и не гладьте съемную ткань. Сушить ткань необходимо только естественным путем.

Внимание! При чистке запрещено использовать любые агрессивные средства, такие как бензин, растворители или спирт. Никогда не погружайте массажер в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

Рекомендуется хранить массажер в защитном чехле в

чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Питание массажера

Во время использования массажера о критически низком уровне заряда аккумулятора устройство проинформирует тремя короткими звуковыми сигналами или символом  на ЖК-дисплее. Зарядите аккумулятор, подключив массажер к компьютеру или к сетевому зарядному устройству с помощью USB-кабеля. Во время зарядки будет мигать индикатор уровня заряда аккумулятора  который прекратит мигать после полной зарядки. Полная зарядка аккумулятора занимает приблизительно 2 часа.

Полностью заряженный массажер можно использовать в течение 4-5 дней (по 15 минут каждый день).

Срок службы аккумулятора массажера более 500 циклов зарядки-разрядки, обеспечивая срок эксплуатации около 3 лет.

Срок службы аккумулятора сокращается, если массажер длительное время не используется. Рекомендуется заряжать аккумулятор не реже одного раза в месяц.

Условия хранения и транспортирования

- Массажер хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей
- Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%
- Транспортировка массажера осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта

Утилизация продукта

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру.

За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажера для глаз «Bodo» уполномоченным дилером в течение 1 года со дня продажи изделия. Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающими факт совершения покупки.

Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии.

Гарантия не распространяется на повреждения и износ ткани.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажера для глаз и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажер для глаз на новый, адекватный по стоимости неисправному массажеру для глаз на дату приобретения.

Гарантия распространяется на массажер для глаз при соблюдении правил эксплуатации. Любые попытки изменить или разобрать конструкцию, приведут к снятию продукта с гарантии.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не уполномоченным сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: _____

Компания-продавец: _____

Телефон: _____

ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.

_____ / _____

(подпись)

(расшифровка)