



МАССАЖНАЯ
НАКИДКА

KINETIC

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажной накидки Kinetiс, которая позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все ее функции. Сохраните и запомните эти инструкции.

Примечание:

технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажера в следующих случаях:

- ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца, заболеванием кровеносных сосудов и повышенным кровяным давлением
- ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
- ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
- ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
- ✓ при онкологии и большинстве видов доброкачественных опухолей
- ✓ страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
- ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
- ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
- ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела

Предупреждение

Во избежание возгорания и получения ожогов, поражения электрическим током или других травм:

- ✓ Не оставляйте без присмотра массажную накидку подключенную к электросети. Всегда отключайте электропитание, когда не используете накидку или когда перемещаете ее
- ✓ Не используйте массажную накидку под одеялом, тканью или подушкой. Это может вызвать перегрев и последующее возгорание, вызвать ожоги и другие травмы
- ✓ Дети должны использовать массажную накидку только под присмотром взрослых
- ✓ Используйте массажную накидку строго по назначению, как описано в данном руководстве пользователя. Не используйте блоки питания сторонних производителей
- ✓ При повреждении кабеля питания, его необходимо заменить на оригинальный от производителя, обратившись к своему продавцу
- ✓ Не перемещайте массажную накидку при помощи шнура питания или используя его как ручку
- ✓ Массажер не предназначен для медицинского, коммерческого и общественного использования


ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Располагайте шнур питания подальше от разогретых поверхностей и предметов
- ✓ Не бросайте массажную накидку
- ✓ Не используйте массажную накидку на улице
- ✓ Не используйте аэрозоли и спреи рядом с работающей массажной накидкой
- ✓ Запрещено использовать массажную накидку лицам с медицинскими противопоказаниями без предварительной консультации с врачом. Лицам с психическими расстройствами и инвалидам разрешено использовать массажную накидку только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность
- ✓ Не используйте массажную накидку, если у вас чувствительная кожа или плохое кровообращение
- ✓ Запрещено использовать массажную накидку, управляя транспортным средством. Массажную накидку можно использовать только до начала движения или после окончания поездки

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- ✓ Массажер хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей
- ✓ Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%
- ✓ Транспортировка массажера осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта

Массажер — это механическое устройство бытового назначения для использования в квартире, доме или офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа различных участков тела. Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Механизмы массажера, приводящиеся в движение различными способами, осуществляют массажные движения.

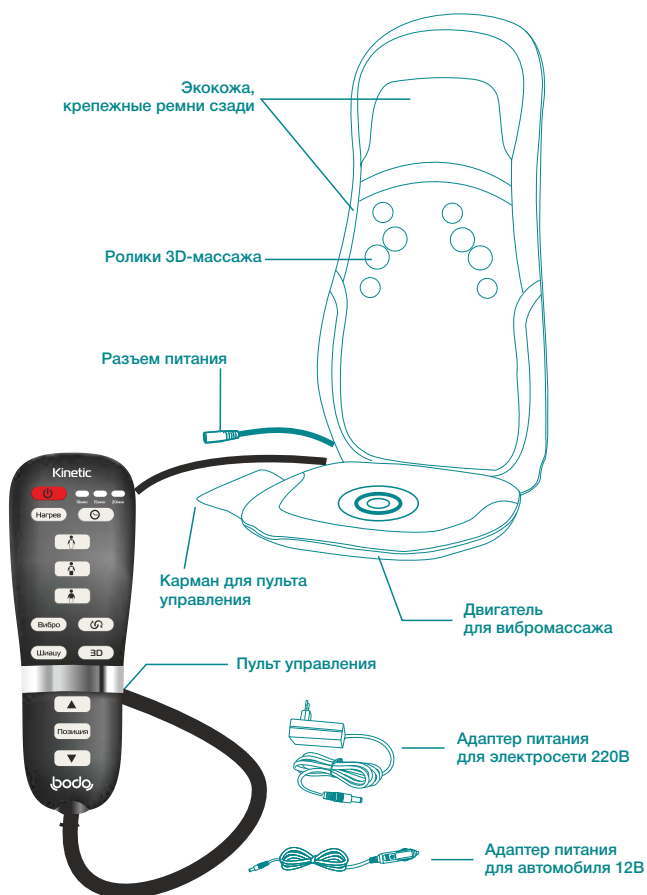

Кнопка «Вкл/Выкл»

Включение: нажмите кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор питания, который горит и в режиме ожидания. Массажер по умолчанию запустит режим массажа всей спины.

Выключение: нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы завершить работу массажера. Все массажные ролики начнут возвращаться на позицию, как до включения, при этом кнопка «Вкл/Выкл» будет мигать до тех пор, пока массажер не выключится.

Кнопка «Нагрев»

Нажмите кнопку «Нагрев» для функции прогрева во время массажа спины и массажа шиацу, при этом загорятся световые индикаторы на массажных роликах. Функция вибрации при этом также может быть активна. Нажмите кнопку «Нагрев» еще раз, чтобы выключить нагрев. При выключении массажа спины и массажа шиацу, функция нагрева автоматически выключается.

Кнопка выбора длительности массажа

Нажмите на кнопку для выбора длительности массажа: 10, 15 или 20 минут, при этом для каждого значения времени на пульте загорается световой индикатор.

Кнопка – массаж всей спины

Нажмите эту кнопку, чтобы начать массаж всей спины, при этом на пульте загорится соответствующий индикатор. Массажирование происходит вверх и вниз вдоль всей спины с функцией вращения роликов. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить массаж всей спины.

Кнопка – массаж верхней части спины

Нажмите эту кнопку, чтобы начать массаж только верхней части спины, при этом на пульте загорится соответствующий индикатор. Массажирование происходит вверх и вниз с функцией вращения роликов только для верхней части спины. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить массаж верхней части спины.

Кнопка – массаж нижней части спины

Нажмите эту кнопку, чтобы начать массаж только нижней части спины, при этом на пульте загорится соответствующий индикатор. Массажирование происходит вверх и вниз с функцией вращения роликов только для нижней части спины. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить массаж нижней части спины.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка «Вибро»

Кнопка «Вибро» запускает дополнительно функцию массажа бедер и ягодиц. Можно включать совместно с программами массажа любой части спины.

Кнопка «Шицу»

Кнопка «Шицу» запускает дополнительно функцию массажа шицу, при этом на пульте загорится соответствующий индикатор. Массаж шицу происходит вверх и вниз вдоль всей спины. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить массаж шицу.

Кнопка «Асинхронный массаж»

Кнопка «Асинхронный массаж» изменяет направление вращения массажных роликов и чередует синхронные движения массажного механизма с асинхронными.

Кнопка «3D»

Кнопка «3D» работает только в режиме шицу массажа. Нажатие на кнопку позволяет настроить глубину воздействия массажного механизма и его охват.

Кнопка «Позиция»

Нажмите кнопку «Позиция», чтобы активировать функцию изменения расположения массажных роликов. Долгое нажатие кнопки вверх  - перемещает вверх массажные ролики во время массажа. Долгое нажатие кнопки вниз  - перемещает вниз массажные ролики во время массажа. Как только вы отпустите кнопку вверх или вниз, движение массажных роликов прекратится и они вернуться в прежнее состояние, как при ранее заданной программе массажа.

Применяйте данную функцию, если хотите выбрать строго определенный участок спины для массажа.

- длительный массаж одной и той же части тела может вызвать раздражение и привести к противоположному эффекту
- после непрерывной работы массажера в течение 20 минут, позвольте ему охладиться как минимум 15 минут, если хотите еще продолжить массаж
- обязательно отключайте электропитание массажера, если не пользуетесь им

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой массажной накидки убедитесь, что она выключена, а вилка адаптера питания отсоединена от розетки. Дайте устройству остыть. Чистите только внешнюю часть накидки мягкой тканью, слегка смоченной моющим средством (например, мыльным раствором). Запрещено использовать агрессивные моющие средства, твердые щетки, бензин, растворители или спирт. Данные вещества могут изменить цвет поверхности массажной накидки. Протрите поверхность накидки сухой тканью. При чистке никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство. Подождите, пока устройство полностью высохнет, прежде чем использовать его снова. Исключите любые перегибы в кабеле. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной упаковке и держать его в чистом сухом месте.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: массажная накидка

Модель: Kinetic

Входное напряжение: AC100-240V/50-60Hz

Выходное напряжение блока питания: DC12V/2.5A

Мощность: 30W

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажной накидки «Bodo» дилером в течение 1 года со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком представляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки накидки.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажную накидку на новую, адекватную по стоимости неисправной массажной накидке на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажной накидки производился кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки массажной накидки в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажной накидки.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов
- при эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 6 месяцев

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: массажная накидка KINETIC _____

Компания-продавец: _____

Телефон: _____

ФИО клиента: _____

Адрес продавца: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)