

МАССАЖНОЕ  
КРЕСЛО

# Palladium

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





## Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Bodo Palladium**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.



# СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .....	<b>6</b>
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ .....	<b>8</b>
ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА .....	<b>9</b>
СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА .....	<b>10</b>
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА .....	<b>13</b>
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	<b>14</b>
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ .....	<b>15</b>
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ .....	<b>16</b>
УХОД И ХРАНЕНИЕ .....	<b>23</b>
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	<b>24</b>
СПЕЦИФИКАЦИЯ .....	<b>24</b>
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА .....	<b>25</b>
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	<b>25</b>

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного кресла.

Инструкции по технике безопасности содержат разделы «ВНИМАНИЕ», «ЗАПРЕЩЕНО» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - это очень важные предостережения по безопасности, уделите им особое внимание!



### ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
  - ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
  - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
  - ✓ страдаете хроническими заболеваниями сердца и повышенным кровяным давлением
  - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
  - ✓ страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника
  - ✓ страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое телосложение
  - ✓ при онкологии
  - ✓ при парестезии
  - ✓ при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате
  - ✓ при тендовагините и остеопорозе
  - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
  - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
  - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
  - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
  - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Использование массажного кресла лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственным за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.



### ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а также класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
- Вставать на кресло во время массажа.
- Перемещать работающее кресло.
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности

- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 120 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла — 20 минут в день. Начинать всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5 минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания рук или ног между массажными роликами и в пространство между механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Пульт управления следует держать в специальном кармане во избежание его возможной поломки и случайной активации.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Массажное кресло хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.
- Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.
- Транспортировка массажного кресла осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

## ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажное кресло — это устройство бытового назначения для использования в квартире, доме или офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа. Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Устройство совмещает в себе кресло для сидения и механизмы, приводящиеся в движения различными способами, осуществляющими массажный контакт с телом человека.



## СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА


### Шаг 1

Аккуратно достаньте корпус кресла, массажный блок для ног, подлокотники и остальные комплектующие из коробок. Кресло комплектуется набором для сборки. Проверьте комплектность.

### Шаг 2

Возьмите обеими руками подлокотник, приставьте к корпусу массажного кресла. Плотно соедините между собой разъемы шнуров питания и воздушную трубку корпуса массажного кресла с соплом подлокотника. Проверьте качество соединения. Убедитесь, что воздушная трубка и провод не скручены между собой и не пережаты.

Совместите и соедините вместе кронштейн крепления подлокотника и корпуса массажного кресла. Закрепите подлокотник в корпусе кресла при помощи винтов в задней его части и в каркасе сиденья. Аналогично выполните установку подлокотника с другой стороны кресла.

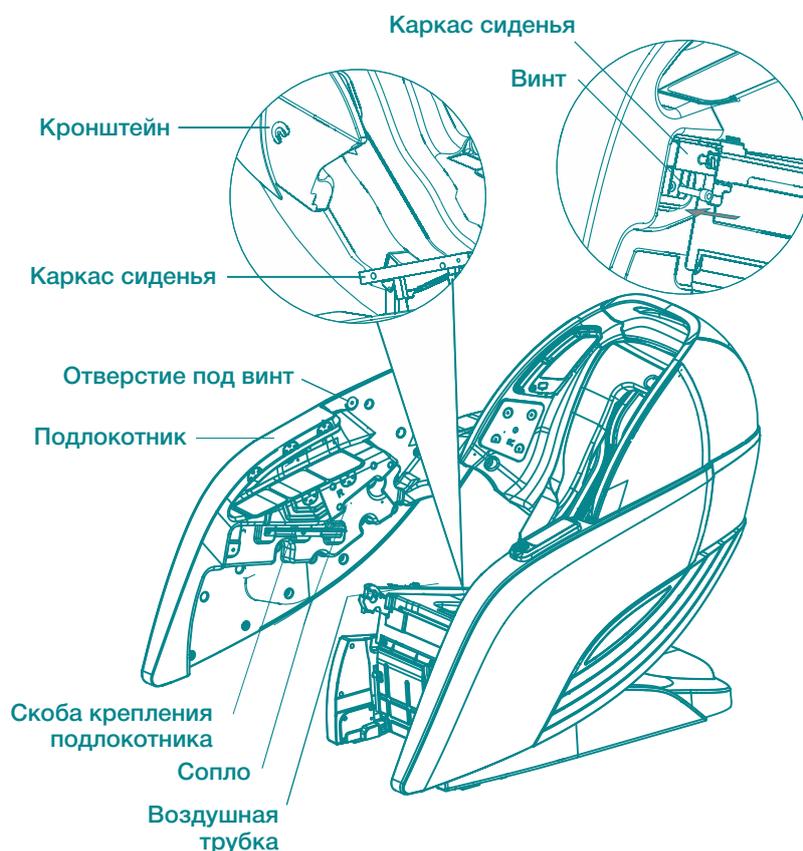


### Шаг 3


Установите внутреннюю и внешнюю втулки на ось крепления массажного блока для ног.



Поднимите массажный блок для ног и подсоедините его к корпусу массажного кресла, совместив ось с кронштейнами крепления, как показано на схеме. После того, как массажный блок для ног будет надежно установлен, опустите с левой и правой стороны специальный замок. Стяните замки винтами для фиксации соединения оси и кронштейна.

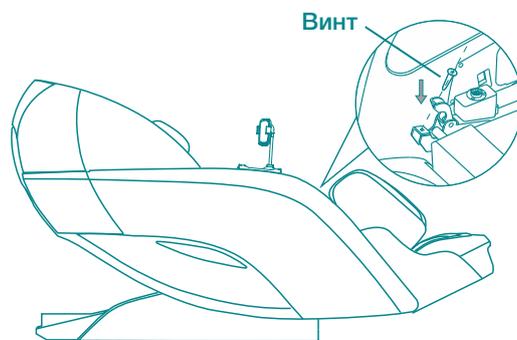

Приподнимите массажный блок для ног и вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем в корпусе кресла, а воздушную трубку в сопло. Проверьте качество соединений. Убедитесь, что воздушная трубка и провод не скручены между собой и не пережаты.

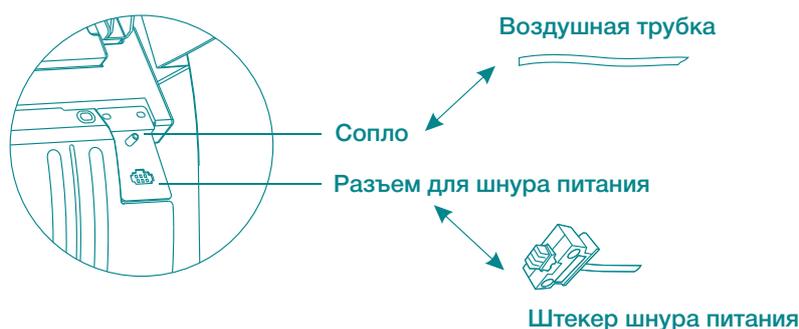

### Шаг 4

Соберите стойку и держатель мобильного телефона, установив круглый шарнир крепления стойки в гнездо держателя. Нижний конец стойки плотно вставьте в специальный разъем подлокотника. По часовой стрелке затяните контргайку на круглом шарнире, чтобы зафиксировать держатель телефона в стойке. Подсоедините шнур питания стойки к порту беспроводной зарядки. Убедитесь, что держатель телефона направлен в сторону массажного кресла.



## СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА


**Примечание:** во время зарядки мобильного телефона постоянно светится красный индикатор. Индикатор мигает, когда зарядка не производится. Если красный индикатор сменился зеленым - зарядка завершена.

### Шаг 5

Присоедините к массажному креслу подушку спинки и подголовник с помощью молний и застежек.

### Шаг 6

Вставьте штекер шнура пульта управления в соответствующий разъем на внутренней стороне правого подлокотника. Обратите внимание на выпуклый и вогнутый рельеф обоих разъемов — это своеобразный ключ для правильного подключения, чтобы соединительные контакты в разъемах совпадали. Затяните фиксирующую гайку в соединении.

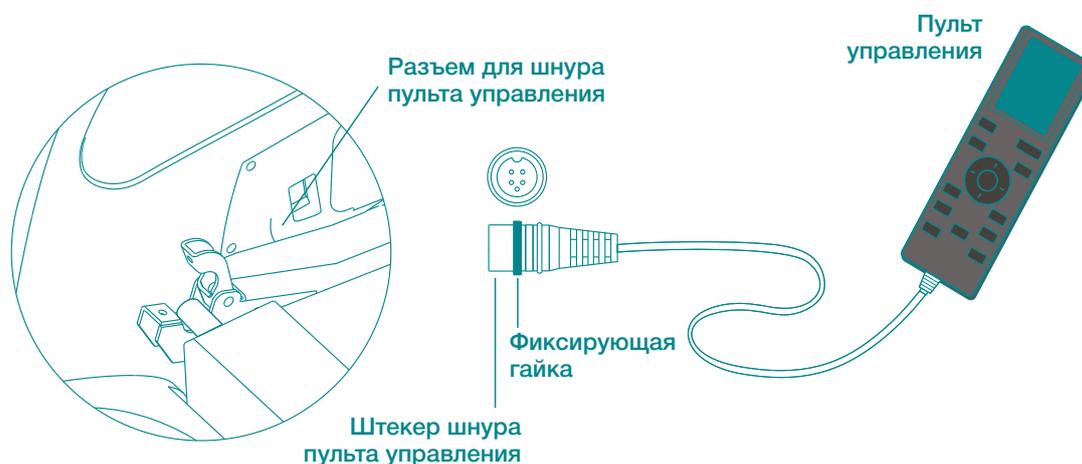

### Шаг 7

Вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания сзади кресла. Вставьте вилку шнура питания в розетку.




Массажное кресло оборудовано колесиками в нижней части для перемещения.

Максимально поднимите спинку кресла.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания и пульта управления на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла вам необходимо будет его сначала наклонить и поставить на колесики при помощи двух или более человек.

Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите кресло с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

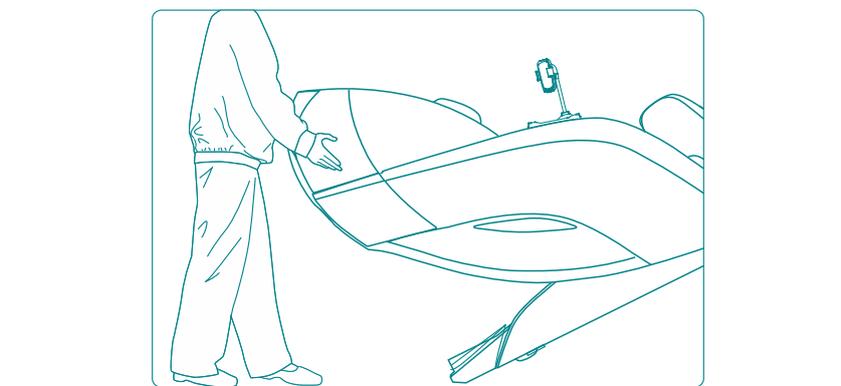


### ВНИМАНИЕ

- Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью трех или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку в задней части.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») перед подключением кресла к электросети.


## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство (не менее 10 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 60 см впереди кресла). Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

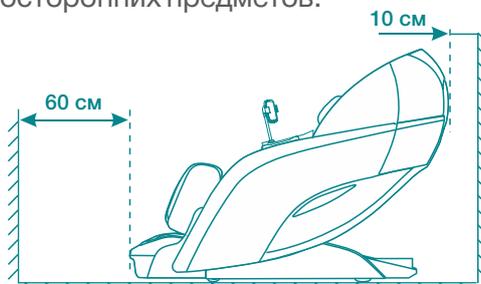

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.

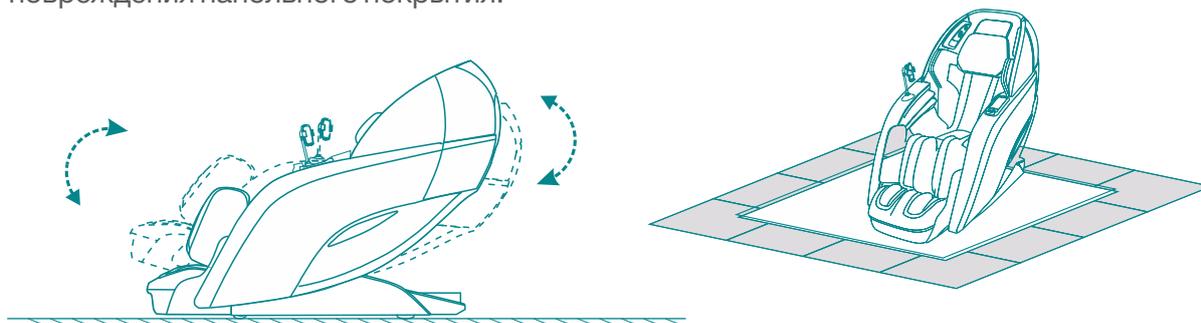

Включите питание массажного кресла, нажав на переключатель «Вкл/Выкл» в положение «I». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, выберите необходимую программу массажа и ее длительность.



### ВНИМАНИЕ

- Избегайте попадания конечностей и прочих предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а также в пространства между механическими частями кресла во время его работы.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения

После использования выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «O») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.

Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.





### Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»

включает и выключает все функции массажного кресла.

Когда кресло подключено к электросети, нажмите эту кнопку — загорится и станет активным экранное меню пульта управления. Выберите необходимую программу массажа и ее длительность.

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» еще раз, чтобы выключить массажное кресло. Массаж прекратится, все массажные ролики, спинка кресла и массажный блок для ног вернуться в свое исходное положение.



### Кнопка «МЕНЮ»

Нажмите кнопку «МЕНЮ» для выбора автоматических программ, программ массажа ручного режима, 3D массажа, воздушно-компрессионного массажа, включения функции прогрева или выбора меню настроек программ.



### Кнопка «ПОЗИЦИЯ ПЛЕЧ»

настройка позиции массажных роликов для плеч.

В программах массажа ручного режима при помощи стрелок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» можно изменить позицию массажных роликов для точечного массажа, а для автоматических программ настроить положение роликов в области плеч после сканирования акупунктурных точек.



### Кнопка «АВТО»

автоматические программы массажа.

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню выбора 1 из 12 автоматических программ массажа, разделенных на 4 категории: «Options» (*King Selecting, Wake Up, Relaxation*); «User» (*CEO Comfort, Queen Special, Senior Priority*); «Part» (*Neck&Shoulder, Back&Spine, Waist&Hip*); «Time» (*Morning Zap, Refreshing Nap, Sweet Dreams*).



### Кнопки джойстика:

«ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВЛЕВО», «ВПРАВО» — навигация по меню пульта управления.

«ОК» — подтверждение выбора, переход к следующему пункту меню или запуск режима «Нулевой гравитации».

- Нажмите кнопку джойстика «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВЛЕВО» или «ВПРАВО» для быстрого перемещения по меню и кнопку «ОК» для запуска нужной программы массажа или подтверждения выбора настроек.
- Во время сеанса массажа нажмите кнопку «ОК» для придания креслу позиции «нулевой гравитации». Кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» изменяют интенсивность роликового массажа. Кнопки «ВЛЕВО» или «ВПРАВО» изменяют интенсивность воздушно-компрессионного массажа.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** «Нулевая гравитация» — это особый режим работы массажного кресла, при котором тело человека принимает максимально расслабленное положение, при этом усиливается массажный эффект. Голова и ноги находятся практически на одном уровне, тело и ноги расположены под определенным углом — в таком положении нагрузка равномерно распределяется по всему телу, и оно максимально расслаблено.



### Кнопка «3D»

настройка силы 3D массажа.

Нажмите эту кнопку для изменения силы 3D массажа в автоматических программах или программах массажа ручного режима.



### Кнопка «ПОДНЯТЬ НОГИ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить подъем.



### Кнопка «ОПУСТИТЬ НОГИ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение.



### Кнопка «ПОДНЯТЬ СПИНКУ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять спинку кресла. Отпустите кнопку, чтобы остановить подъем.



### Кнопка «ОПУСТИТЬ СПИНКУ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить спинку кресла. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение.



### Кнопка «УДЛИНИТЬ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы удлинить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение.




### Кнопка «УКОРОТИТЬ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы укоротить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение.

Когда кресло подключено к электросети, нажмите кнопку питания «Вкл/Выкл» на пульте управления — включится ЖК-дисплей и его меню станет активным. Войдите в меню «Auto», затем в подменю «Options», «User», «Part» или «Time», чтобы выбрать 1 из 12 автоматических программ массажа: *King Selecting*, *Wake Up*, *Relaxation*, *CEO Comfort*, *Queen Special*, *Senior Priority*, *Neck&Shoulder*, *Back&Spine*, *Waist&Hip*, *Morning Zap*, *Refreshing Nap*, *Sweet Dreams*.

Кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных точек и позиции плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, вы можете самостоятельно изменить и настроить их позицию с помощью кнопок «ПОЗИЦИЯ ПЛЕЧ». После регулировки начнется массаж.

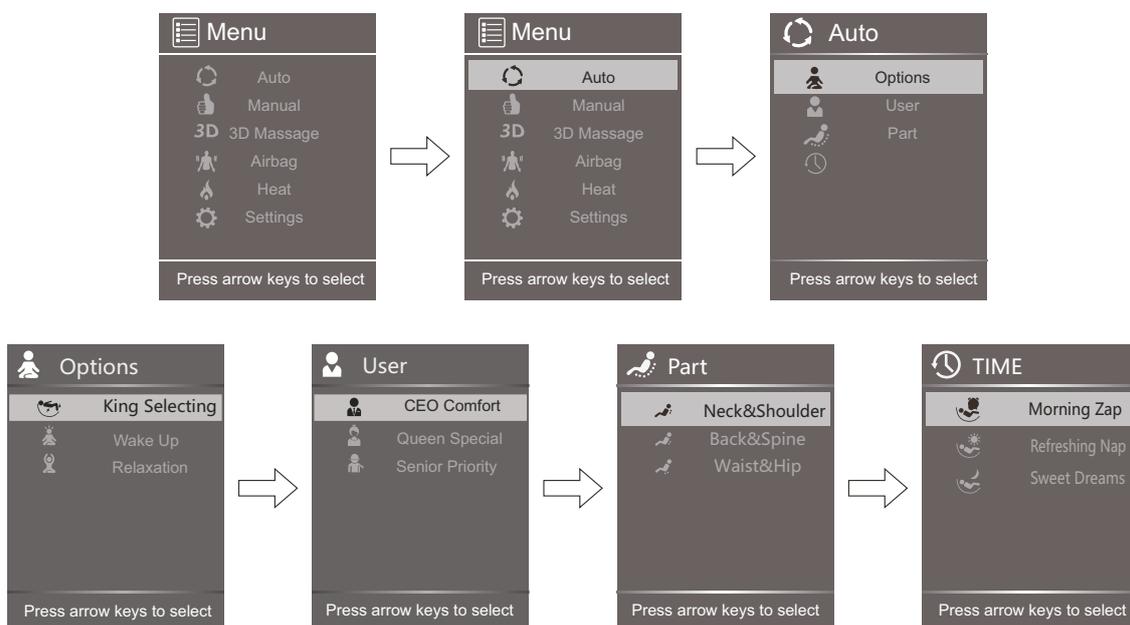

### Программа «King Selecting»

Общий массаж тела, в котором используются техники умеренного разминания и растяжения для расслабления напряженных мышц и поддержания их эластичности.

### Программа «Wake Up»

Использует технику надавливания и разминания мышц плеч и спины средней степени воздействия. Сеанс массажа придаст приятный тонус вашему телу на весь день.

### Программа «Relaxation»

Использует массажные техники легкой степени воздействия, чтобы расслабить нижнюю часть тела, восстановить зажатые мышцы, снять накопившуюся усталость.

### Программа «CEO Comfort»

Использует техники массажа средней и высокой интенсивности, чтобы принести максимальное облегчение и комфорт.

### Программа «Queen Special»

Разнообразные легкие техники массажа для разогрева мышц, способствуют их успокоению и расслаблению.

### **Программа «Senior Priority»**

Сеанс мягкого массажа расслабляет мышцы спины, талии и бедер, восстанавливая и улучшая их эластичность.

### **Программа «Neck&Shoulder»**

Интенсивный массаж, сосредоточенный в основном в области шеи, плеч и верхней части спины, облегчает мышечные боли в данных областях.

### **Программа «Back&Spine»**

Интенсивный и более глубокий массаж шиацу всей спины.

### **Программа «Waist&Hip»**

Массаж сильной степени воздействия, сфокусированный на мышцах поясницы, талии и бедер.

### **Программа «Morning Zap»**

Стимулирующий массаж всего тела с использованием разных техник, помогает быстро восстановиться как физически, так и эмоционально.

### **Программа «Refresh Nap»**


Программа разработана специально для успокоения и расслабления напряженных мышц. Разминая и улучшая кровообращение, она помогает им быстрее восстановиться.

### **Программа «Sweet Dreams»**

Программа для улучшения качества отдыха и сна с использованием самых легких техник массажа.

### Программы массажа ручного режима

Нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте управления. При помощи кнопок джойстика зайдите в меню «Manual», затем в подменю «Mode» для выбора 1 из 6 программ массажа ручного режима и задать индивидуальные настройки данного массажа, изменяя параметры: «Part», «Width», «Speed», «Roller», «Zero».

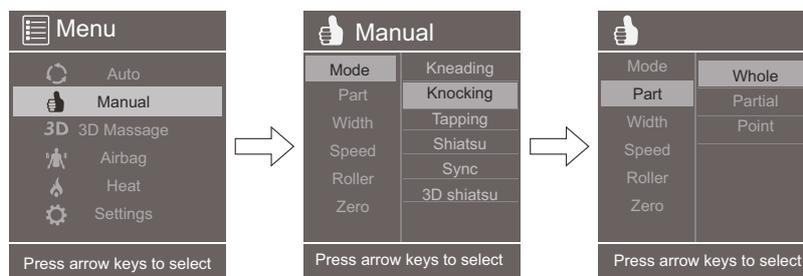


Программы массажа ручного режима включают в себя: «Kneading» (разминание), «Knocking» (поколачивание), «Tapping» (постукивание), «Shiatsu» (шиацу), «Sync» (разминание с поколачиванием), «3D shiatsu» (3D шиацу).

### Настройки массажа ручного режима:

#### «Part» (выбор зоны)

С помощью кнопок навигации джойстика измените настройку на «Whole», «Partial» или «Point», чтобы запустить массаж всего тела, в определенной зоне (области тела) или точке соответственно.

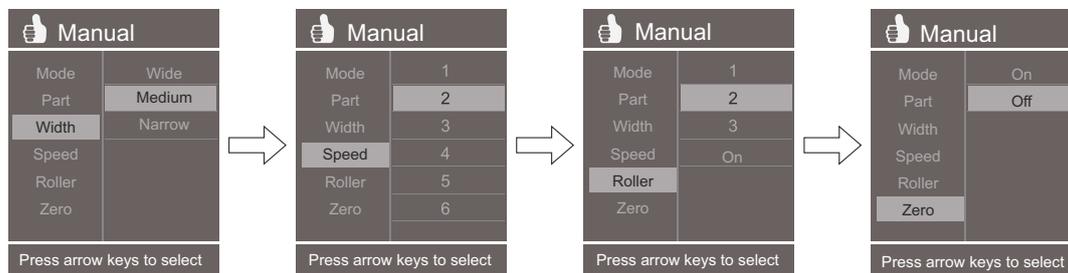

#### «Width» (охват)

Выберите подменю «Wide», «Medium» или «Narrow», чтобы в процессе массажа изменить расстояние между массажными роликами, выбрав широкий, средний или узкий охват. Выбранный параметр отображается на главном экране ЖК-дисплея.

#### «Speed» (скорость)

В подменю настроек «Speed» выберите 1 из 6 скоростей движения массажного механизма.

#### «Roller» (ролики для стоп)


Войдите в подменю «Roller» и включите, отрегулируйте скорость (1 из 3) или полностью выключите роликовый массаж стоп. Настройки скорости роликов для стоп недоступны, если выбран воздушно-компрессионный массаж всего тела или только ног.

#### «Zero» (невесомость)

Выберите подменю «On» и придайте массажному креслу позицию «нулевой гравитации», при котором голова и ноги человека находятся на одной прямой — это самое удобное, правильное и расслабляющее положение, при котором усиливается массажный эффект.


**«3D Massage» (сила 3D массажа)**

Нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте управления. При помощи кнопок джойстика зайдите в меню «3D Massage», затем в подменю «Force» и выберите 1 из 3 уровней интенсивности 3D массажа для автоматических программ и 1 из 5 уровней для программ массажа ручного режима. Настройки силы 3D массажа недоступны в программе массажа ручного режима «3D shiatsu».

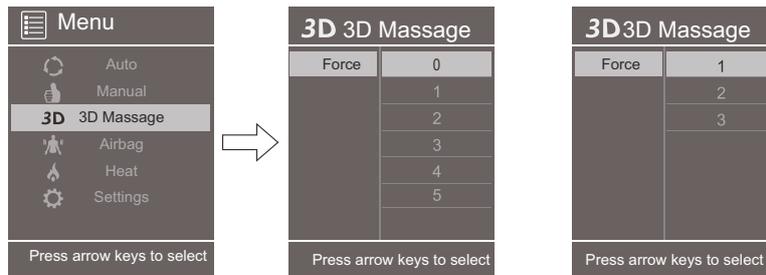


**«Airbag» (аэромассаж)**

Нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте управления. При помощи кнопок джойстика зайдите в меню «Airbag», затем в подменю «Part» для запуска воздушно-компрессионного массажа всего тела «Full» или в определенной области: «Arm&Shoulder» (руки и плечи), «Back&Waist» (спина и поясница), «Leg&Foot» (ступни и голени), «Buttock» (бедра). Выберите 1 из 5 уровней силы воздушно-компрессионного массажа в подменю «Force» или полностью выключите его, выбрав «Off».

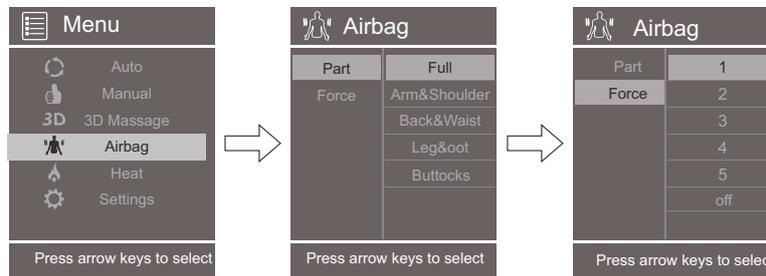


**«Heat» (прогрев)**

Зайдите в меню «Heat», затем в подменю «Back» или «Leg» и выберите 1 из 3 уровней прогрева спины или голени, или полностью выключите прогрев, выбрав «Off».

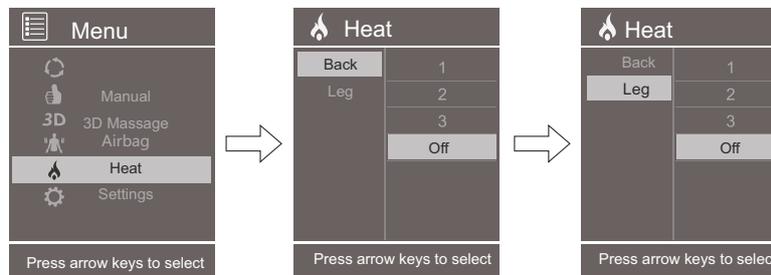


### «Setting» (настройки)

Нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте управления. При помощи кнопок джойстика зайдите в меню «Settings», чтобы настроить в подменю «Time» длительность сеанса массажа (10, 20 или 30 минут), активировать или деактивировать функцию «Bluetooth», включить или выключить декоративную подсветку «LED».

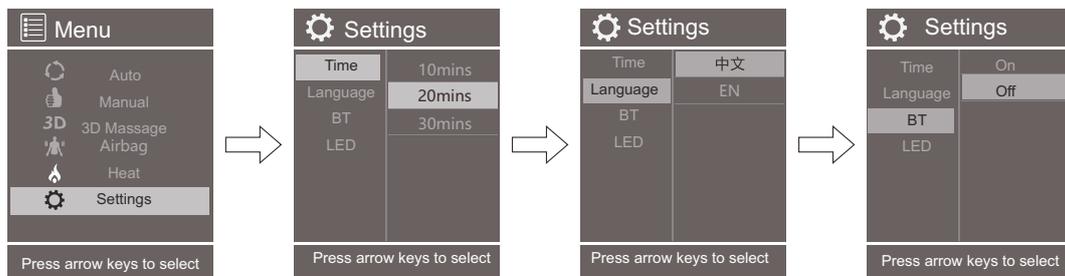


Успешное *Bluetooth* сопряжение с мобильным телефоном или планшетом возможно с поддержкой функции *Bluetooth* в этих устройствах и под управлением операционной системы *Android* или *iOS*. После сканирования доступных *Bluetooth* устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом. После успешного сопряжения вы сможете слушать свою любимую музыку во время массажа через динамики кресла.

При отсутствии каких-либо действий в меню настроек программ, ЖК-дисплей пульта управления отобразит главный экран (см. рисунок ниже).

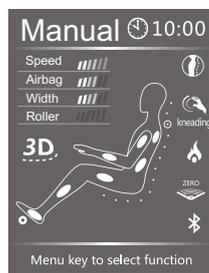


Главный экран при запущенной программе ручного режима

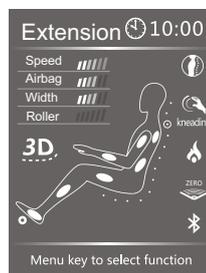

Главный экран при запущенной автоматической программе

### Поворотный переключатель быстрого доступа

Когда массажное кресло находится в режиме ожидания, нажмите кнопку поворотного переключателя, чтобы кресло вышло из спящего режима, нажмите кнопку еще раз, чтобы запустить автоматическую программу массажа. Настройте угол наклона спинки кресла и массажного блока для ног, поворачивая поворотный переключатель по часовой или против часовой стрелки. Нажмите и удерживайте кнопку поворотного переключателя в течение 3-х секунд, чтобы вернуть кресло в режим ожидания.

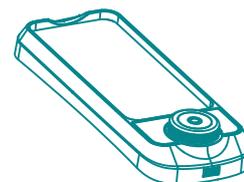

### Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.



#### ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

### Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.

#### НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки



#### ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции кресла	Это может быть звук мотора, компрессора, механических частей кресла или звук трения массажного ролика о покрытие	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Кресло не включается	Вилка шнура питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура питания в розетку. Проверьте все контакты.
	Не включен переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ»	Нажмите на переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» (в положение «I»)
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на аналогичный по параметрам
Отсутствует звук из динамиков	Уровень громкости звука установлен на минимальном значении	Увеличьте уровень громкости звука
Массажный блок для ног или спинка кресла не поднимается или не опускается	Имеются помехи и препятствия при складывании или раскладывании кресла	Устраните препятствия и чрезмерное давление на спинку кресла или массажный блок для ног
	Массажный блок для ног или спинка кресла перегружены	
Воздушные подушки не надуваются	Заблокированы воздуховоды	Почистите воздуховоды
	Не подсоединены воздушные трубки к соплам	Подсоедините воздушные трубки к соплам

Наименование продукта: массажное кресло

Название модели: Palladium

Напряжение: AC220-240V/50Hz

Мощность: 180W

### УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами!

Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона.

За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Vodo» дилером в течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

**Гарантийное обслуживание не производится в случаях:**

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: \_\_\_\_\_  
Наименование товара: \_\_\_\_\_  
Компания-продавец: \_\_\_\_\_  
Адрес продавца: \_\_\_\_\_  
Телефон продавца: \_\_\_\_\_  
ФИО клиента: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.  
Претензий не имею.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)