




МАССАЖЕР
ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ

RELAX

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

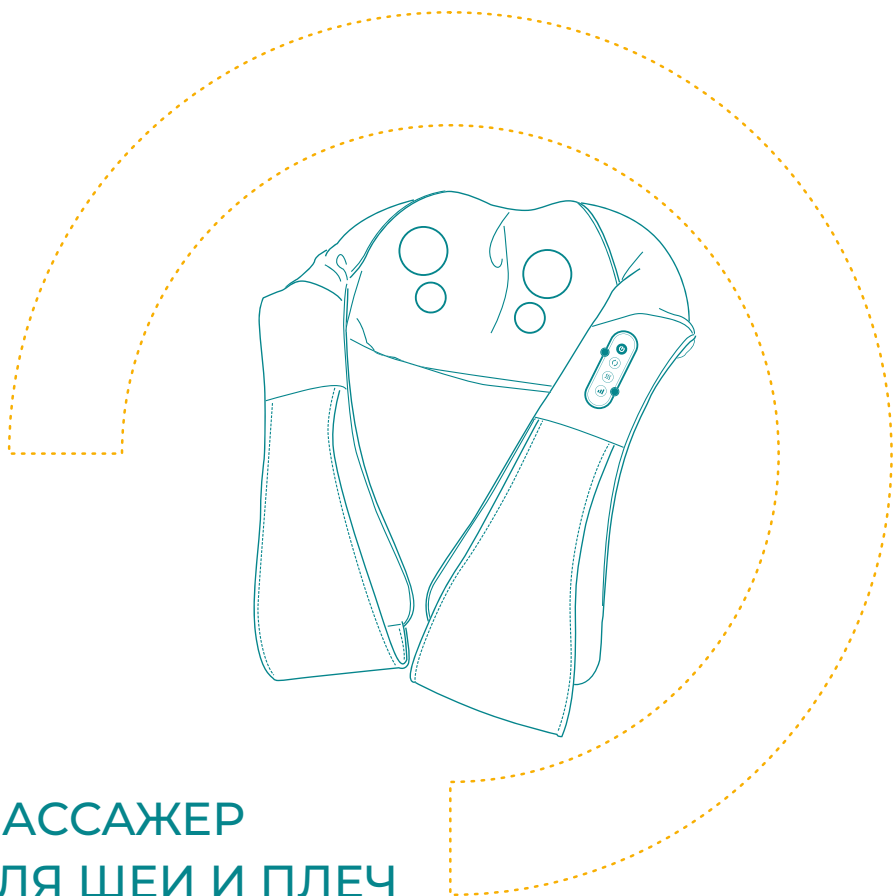

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажера для шеи и плеч Relax, который позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Сохраните и запомните эти инструкции.

Примечание:

технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажера в следующих случаях:

- ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца, заболеванием кровеносных сосудов и повышенным кровяным давлением
- ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
- ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
- ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
- ✓ при онкологии и большинстве видов доброкачественных опухолей
- ✓ страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
- ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
- ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
- ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела

Предупреждение

Во избежание возгорания и получения ожогов, поражения электрическим током или других травм:


- ✓ Не оставляйте без присмотра массажер подключенным к электросети. Всегда отключайте электропитание, когда не используете массажер или когда перемещаете его
- ✓ Не используйте массажер под одеялом или под тканью. Это может вызвать перегрев и последующее возгорание, вызвать ожоги и другие травмы
- ✓ Используйте массажер строго по назначению, как описано в данном руководстве пользователя. Не используйте блоки питания сторонних производителей
- ✓ При повреждении кабеля питания, его необходимо заменить на оригинальный от производителя, обратившись к своему продавцу
- ✓ Не перемещайте массажер при помощи шнура питания или используя его как ручку
- ✓ Располагайте шнур питания подальше от разогретых поверхностей и предметов
- ✓ Не бросайте массажер
- ✓ Массажер не предназначен для медицинского, коммерческого и общественного использования

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Не используйте массажер на улице
- ✓ Не используйте аэрозоли и спреи рядом с работающим массажером
- ✓ Не используйте массажер, если у вас чувствительная кожа или плохое кровообращение
- ✓ Запрещено использовать массажер лицам с медицинскими противопоказаниями без предварительной консультации с врачом. Лицам с психическими расстройствами и инвалидам разрешено использовать массажер только под строгим контролем опытного инструктора, ответственным за безопасность
- ✓ Запрещено использовать массажер, управляя транспортным средством. Массажер можно использовать только до начала движения или после окончания поездки

Описание и комплектация массажера

Массажер — это механическое устройство бытового назначения для использования дома или в офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа различных участков тела (строго по предназначению конкретного массажера). Результатом работы массажера является так называемый роботизированный массаж, механизмы массажера, приводящиеся в движения различными способами, осуществляют контакт с телом человека путем массирования участков тела.

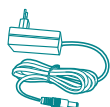


Адаптер питания для электросети 220В



Адаптер питания для автомобиля 12В

УПРАВЛЕНИЕ

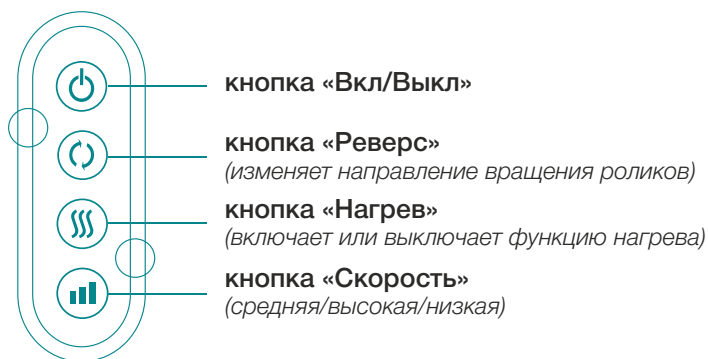

- ✓ Подсоедините адаптер питания к разъему питания массажера. При подключении вы услышите соответствующий сигнал
- ✓ Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Начнется разминающий массаж с функцией нагрева
- ✓ Нажмите кнопку «Нагрев», чтобы отключить функцию нагрева, продолжая при этом разминающий массаж
- ✓ Нажмите кнопку «Реверс», чтобы изменить направление движения массажных роликов — по часовой или против часовой стрелки
- ✓ Нажмите кнопку «Скорость» для изменения скорости массажа между значениями «средняя», «высокая» и «низкая» для достижения наилучшего эффекта от массажирования
- ✓ Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3-х секунд, чтобы выключить массажер и все его функции

Варианты применения массажера



шея и плечи



спина



ступни



бедра



талия



живот

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Небольшой шум при работе:

- ✓ Когда массажер работает, он издает легкий шум, а так же звук трения роликов о чехол - это нормально. Не является неисправностью

2. Массажер не работает:

- ✓ Массажер не подключен к адаптеру питания - подключите массажер к адаптеру питания. При подключении вы услышите сигнал
- ✓ Не нажата кнопка «Вкл/Выкл» - нажмите кнопку «Вкл/Выкл»
- ✓ Массажер мог перегреться от продолжительного использования - выключите массажер и позвольте ему остыть в течение 30 минут, затем снова включите

Если у вас после вышеизложенных инструкций все еще остались проблемы или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Чистка:

Перед чисткой массажера для шеи и плеч убедитесь, что он выключен, а адаптер питания отсоединен от розетки. Чистите только внешнюю часть массажера мягкой тканью, слегка смоченной моющим средством (например, мыльным раствором). Запрещено использовать агрессивные моющие средства, бензин, растворители или спирт. Данные вещества могут изменить цвет поверхности массажера. При чистке никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

Хранение:

Для хранения, выключите массажер и отсоедините адаптер питания. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной упаковке и держать его в чистом сухом месте.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Не трогайте массажер и адаптер питания мокрыми руками во избежание удара электрическим током
- ✓ Не используйте массажер во влажной или пыльной среде
- ✓ Не используйте массажер при температуре окружающей среды выше 40°C
- ✓ Не используйте массажер на улице
- ✓ Массажер для шеи и плеч предназначен только для взрослых
- ✓ Не используйте массажер при небрежных длинных волосах, а также при неплотно прилегающей одежде и наличии ювелирных изделий
- ✓ Не разбирайте массажер самостоятельно - это может привести к повреждению устройства, его последующей неремонтопригодности и аннулированию гарантии

Прекратите пользоваться устройством, если:

- ✓ вода попала на массажер или кнопку включения
- ✓ массажер поврежден и выступают наружу его внутренние компоненты
- ✓ почувствовали дискомфорт
- ✓ почувствовали резкий запах горелой проводки
- ✓ происходят перебои питания
- ✓ при грозе и молнии

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- ✓ Массажер хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей
- ✓ Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%
- ✓ Транспортировка массажера осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта

Спецификация

Наименование продукта: массажер для шеи и плеч

Модель: Relax

Входное напряжение: AC100-240V/50-60Hz

Выходное напряжение блока питания: DC12V/2.5A

Мощность: 30W

Утилизация продукта

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажера для шеи и плеч «Vodo» дилером в течение 1 года со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком представляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки массажера.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажер для шеи и плеч на новый, адекватный по стоимости неисправному массажеру для шеи и плеч на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажера для шеи и плеч производился кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки массажера в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажера.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов
- при эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 6 месяцев

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: массажер для шеи и плеч Relax _____

Компания-продавец: _____

Телефон: _____

ФИО клиента: _____

Адрес продавца: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
Претензий не имею.

(подпись)

(расшифровка)