



МАССАЖНОЕ
КРЕСЛО-КАЧАЛКА

Ronla

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла-качалки **Bodo Ronla**. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед применением массажного кресла-качалки, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

Утилизация продукта

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ	6
СБОРКА КРЕСЛА	7
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА	8
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	8
УХОД И ХРАНЕНИЕ	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
СПЕЦИФИКАЦИЯ	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного кресла-качалки.



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла-качалки в следующих случаях:
 - ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца, заболеванием кровеносных сосудов и повышенным кровяным давлением
 - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
 - ✓ страдаете заболеванием позвоночника или имеются травмы позвоночника
 - ✓ страдаете мышечной гипотонией
 - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
 - ✓ при онкологии и большинстве видов доброкачественных опухолей
 - ✓ страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
 - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
 - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
 - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
 - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
 - ✓ при любых почечных заболеваниях



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство массажного кресла-качалки
- пользоваться массажным креслом-качалкой на улице, в местах с плохой вентиляцией, под одеялом, подушкой или покрывалом во избежание перегрева
- пользоваться массажным креслом-качалкой на влажное тело
- стоять и прыгать на массажном кресле-качалке, бросать, оказывать на него чрезмерные нагрузки
- использовать медицинские или косметические кремы и лосьоны во время массажа
- использовать аэрозоли и спреи рядом с работающим массажным креслом-качалкой
- использовать массажное кресло-качалку с неубранными длинными волосами, с заколками и украшениями для волос, одежды и другими предметами, которые могут нанести травму во время массажа
- использовать другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом-качалкой
- засыпать и спать в массажном кресле-качалке
- пользоваться неисправными или поврежденными: шнуром питания, вилок или розеткой
- извлекать шнур питания из розетки во время сеанса массажа
- пользоваться массажным креслом-качалкой при грозе и молнии

Запрещено использовать массажное кресло-качалку:



- в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления седативных средств, вызывающих сонливость, подавленное состояние, повышающих или понижающих кровяное давление
- если установлены кардиостимуляторы или другие подобные медицинские устройства для поддержания жизни человека
- при туберкулезе, ревматизме, тендините, дисфункции суставов, эпилептикам, а также людям с нарушением свертываемости крови и аллергией
- в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), высокой температурой, в сильно запыленных местах и местах с высоким электромагнитным излучением
- если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой — в таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности


- Максимальная вес пользователя массажного кресла-качалки составляет 115 кг.
- Перед использованием массажного кресла-качалки убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь массажным креслом-качалкой, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Массажное кресло-качалка не предназначен для медицинского, коммерческого и общественного использования.
- Массажное кресло-качалка предназначено только для взрослых. Использование массажного кресла-качалки лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.
- Массажное кресло-качалка снабжено функцией прогрева, поэтому особое внимание при его работе следует уделять людям с повышенным или наоборот, с полным отсутствием чувствительности тела.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла-качалки и проконсультируйтесь с врачом.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло-качалку сразу после еды.
- Избегайте попадания посторонних предметов, конечностей, волос и одежды в механические части массажного кресла-качалки во время его работы.
- Используйте адаптер питания только из комплекта поставки.
- Не перемещайте массажное кресло-качалку при помощи шнура питания или используя его как ручку
- Если массажное кресло-качалка не используется, выключите его и извлеките вилку адаптера питания из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Если из массажного кресла-качалки слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Рекомендуемое время сеанса массажа в массажном кресле-качалке — 15 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Перерыв между сеансами должен составлять не менее 30 минут.

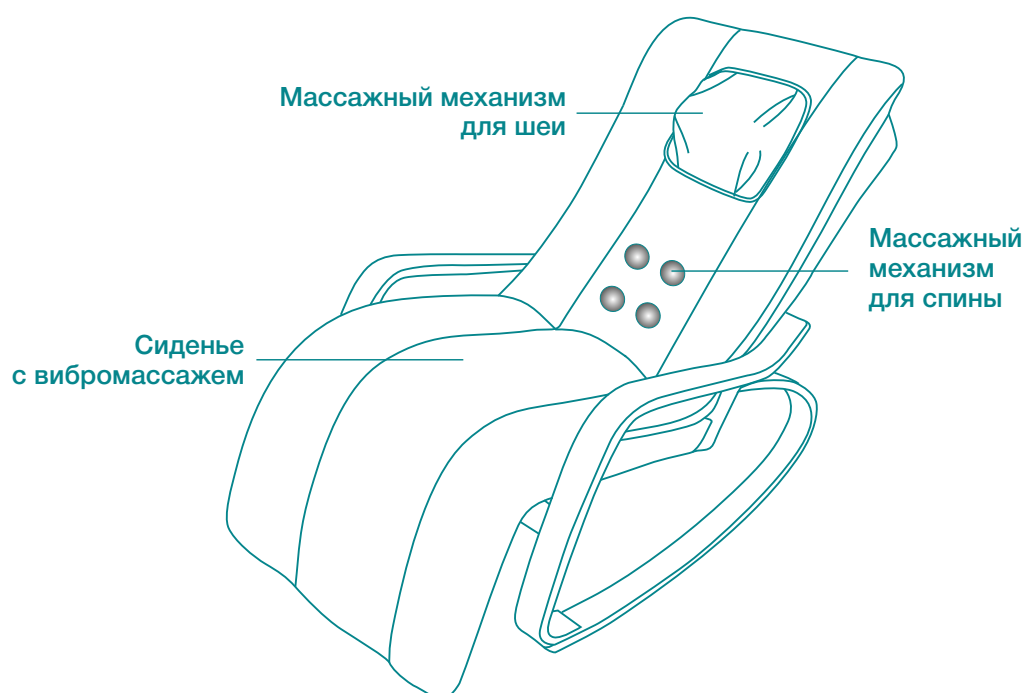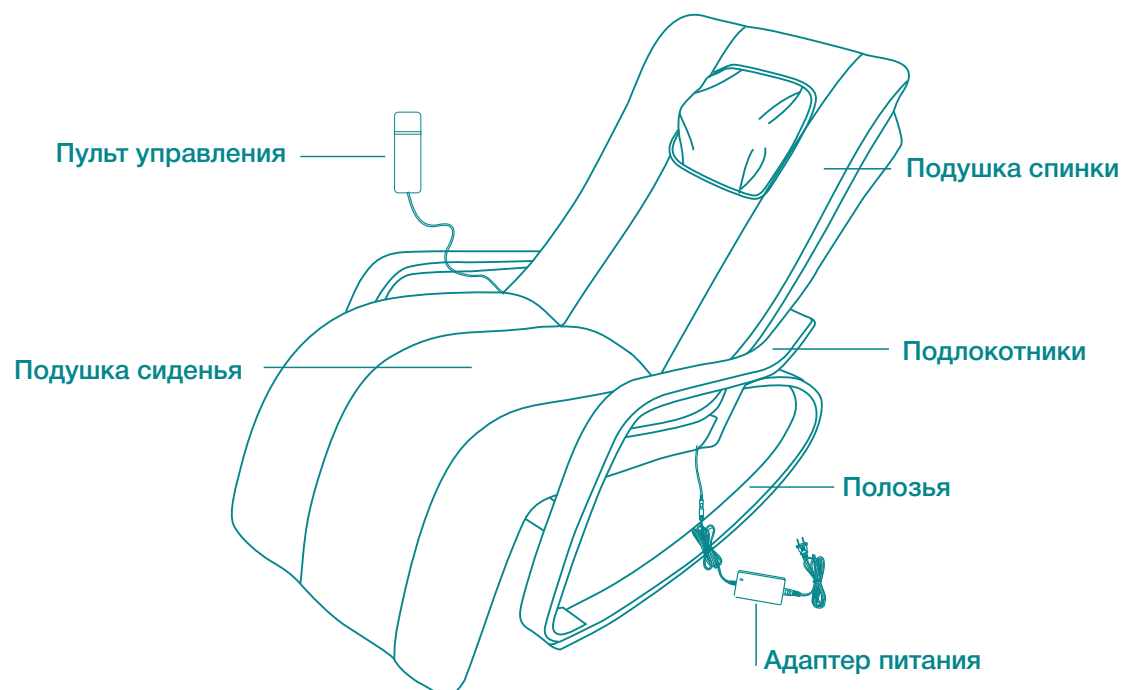


Аккуратно достаньте все детали и комплектующие массажного кресла-качалки из коробки. Проверьте комплектность.

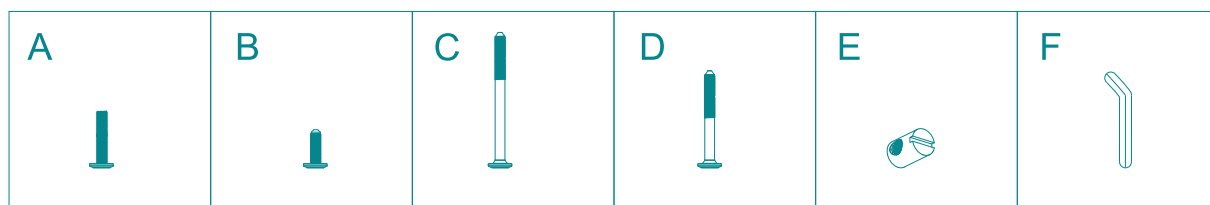


Шаг 1

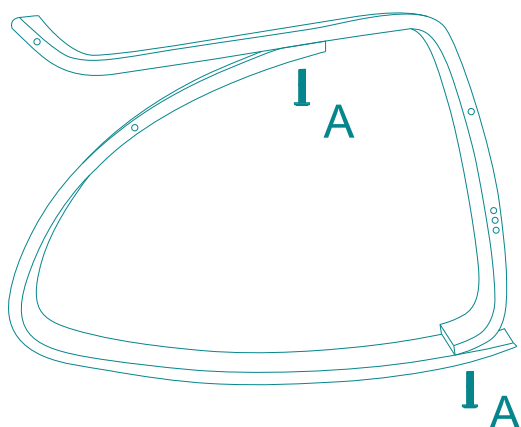

Шаг 2

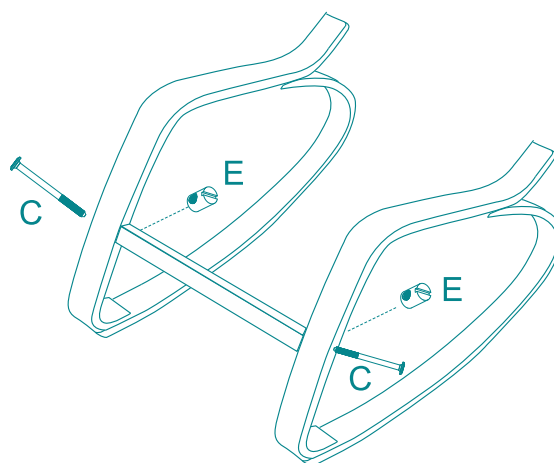

Шаг 3

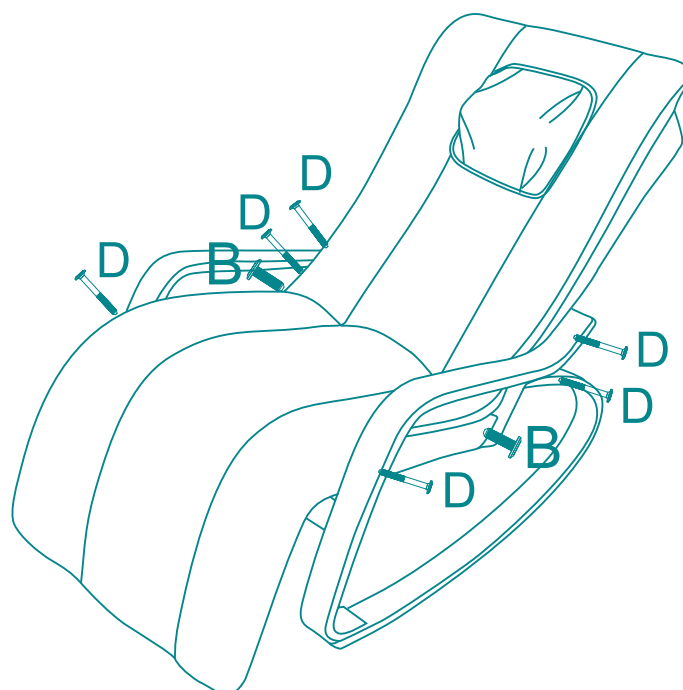

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

Выключите массажное кресло-качалку перед перемещением. Извлеките вилку шнура питания из розетки и положите провода адаптера питания и пульта управления на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла-качалки его необходимо поднять при помощи двух или более человек. Переместите массажное кресло-качалку до места установки и осторожно придайте ему ровное положение. Рекомендуется устанавливать кресло-качалку на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.

ВНИМАНИЕ: Не перемещайте массажное кресло-качалку вместе с людьми. Перед включением массажного кресла-качалки убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подсоедините штекер адаптера питания к разъему питания массажного кресла-качалки. Вставьте вилку шнура адаптера питания в розетку. Удобно расположитесь в массажном кресле-качалке, включите его и запустите желаемый сеанс массажа.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ





Кнопка «Вкл/Выкл»

Когда массажное кресло-качалка подключено к электросети, нажмите эту кнопку для его включения, выберите и запустите необходимую программу массажа. Нажмите кнопку еще раз, массажный механизм спинки вернется в начальную позицию, после чего массажное кресло-качалка выключится.



Кнопка «РЕЖИМ»

Нажмите кнопку, чтобы выбрать 1 из 3 автоматических режимов массажа.



Кнопка «МАССАЖ ШЕИ»

Нажмите кнопку, чтобы запустить разминающий массаж шеи, изменить направление движения массажных роликов (по часовой или против часовой стрелки) или выключить массаж шеи.



Кнопка «ЛОПАТКИ»

Нажмите кнопку, чтобы запустить сеанс массажа верхней части спины.



Кнопка «ВСЯ СПИНА»

Нажмите кнопку, чтобы запустить сеанс массажа всей спины.



Кнопка «ПОЯСНИЦА»

Нажмите кнопку, чтобы запустить сеанс массажа нижней части спины.



Кнопка «ВИБРОМАССАЖ»

Нажмите кнопку и запустите вибромассаж в сиденье. Последовательным нажатием на кнопку выберите 1 из 3 уровней интенсивности вибрации или полностью выключите ее.



Кнопка «ПРОГРЕВ»

Нажмите кнопку, чтобы активировать функцию прогрева спины и шеи.



Кнопка «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»

Нажмите и удерживайте одну из кнопок, чтобы поднять или опустить массажный механизм для шеи. Отпустите кнопку, чтобы остановить его движение.

Данные кнопки не активны в автоматических режимах.



Кнопка «ПОЗИЦИЯ»

Нажмите кнопку, чтобы остановить перемещение массажного механизма вдоль спины и сфокусировать разминающий массаж в определенной области. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить функцию сфокусированного массажа.

Примечание:

- каждый сеанс массажа длится 15 минут, по его завершении массажный механизм спинки вернется в начальную позицию, и массажное кресло-качалка автоматически выключится

- после использования извлеките вилку адаптера питания из розетки

Чистка

Перед чисткой массажного кресла-качалки убедитесь, что оно выключено, а вилка шнура адаптера питания отсоединена от розетки.

Чистите только внешнюю часть массажного кресла-качалки мягкой сухой тканью, аккуратно протирайте ей поверхность подушек спинки и сиденья, подлокотники, полозья, пульт управления, провода и корпус адаптера питания.

Внимание: При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла-качалки и повредить его. Никогда не погружайте массажное кресло-качалку в воду и не допускайте попадания на него воды.

Хранение

Рекомендуется хранить массажное кресло-качалку в недоступном для детей, в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Перед каждым использованием массажного кресла-качалки, убедитесь, что: отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки), не нагревается шнур питания, отсутствуют другие нетипичные признаки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла-качалки. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции кресла-качалки	Это может быть звук мотора, механических частей массажного механизма или звук трения массажного ролика о покрытие	Это нормальная работа массажного кресла-качалки, не является неисправностью
Массажный механизм останавливается во время движения	Массажное кресло-качалка перегружено	Устраните чрезмерное давление на спинку массажного кресла
Массажное кресло-качалка не работает	Вилка шнура адаптера питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура адаптера питания в розетку, проверьте все соединения
	Штекер шнура питания не подсоединен к разъему питания	
	Закончилось время сеанса массажа	Включите массажное кресло-качалку и запустите новый сеанс массажа
Массажное кресло-качалка очень горячее	Слишком долгая непрерывная работа массажного кресла-качалки	Выключите питание и дайте устройству остыть не менее 30 минут перед следующим использованием

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: Массажное кресло-качалка

Модель: Ronla

Напряжение: AC100-240V/50-60Hz

Мощность: 48W

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла-качалки «Bodo» дилером в течение 1 (одного) года со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла-качалки.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло-качалку на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу-качалке на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла-качалки производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла-качалки в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла-качалки.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 6 (шести) месяцев.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____
 Наименование товара: _____
 Компания-продавец: _____
 Адрес продавца: _____
 Телефон продавца: _____
 ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
 Претензий не имею.

_____/_____
 (подпись) (расшифровка)