



МАССАЖЕР
ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ

Wolken

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажера для шеи и плеч **Bodo Wolken**. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед применением массажера, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание:

технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	8
УХОД И ХРАНЕНИЕ.....	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
СПЕЦИФИКАЦИЯ	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте все требования техники безопасности, чтобы убедиться в правильности эксплуатации изделия.

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажера в следующих случаях:

- ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца, заболеванием кровеносных сосудов и повышенным кровяным давлением
- ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
- ✓ страдаете заболеванием позвоночника или имеются травмы позвоночника
- ✓ страдаете мышечной гипотонией
- ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
- ✓ при онкологии и большинстве видов доброкачественных опухолей
- ✓ страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
- ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
- ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
- ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
- ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
- ✓ при любых почечных заболеваниях



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

Запрещено использовать массажер:

- ✓ в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления седативных средств, вызывающих сонливость, подавленное состояние, повышающих или понижающих кровяное давление
- ✓ если установлены кардиостимуляторы или другие подобные медицинские устройства для поддержания жизни человека
- ✓ при туберкулезе, ревматизме, тендините, дисфункции суставов, эпилептикам, а также людям с нарушением свертываемости крови и аллергией

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), высокой температурой, в сильно запыленных местах и местах с высоким электромагнитным излучением
- ✓ если он поврежден, произошел механический или электронный сбой — в таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу

Запрещено:

- ✓ самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство массажера
- ✓ пользоваться массажером, управляя транспортным средством, массажер можно использовать только до начала движения или после окончания поездки
- ✓ пользоваться массажером на улице, в местах с плохой вентиляцией, под одеялом, подушкой или покрывалом во избежание перегрева
- ✓ пользоваться массажером на влажное тело
- ✓ стоять, лежать и прыгать на массажере, бросать, оказывать на него чрезмерные нагрузки
- ✓ использовать медицинские или косметические кремы и лосьоны во время массажа
- ✓ использовать аэрозоли и спреи рядом с работающим массажером
- ✓ использовать массажер с небрежно длинными волосами, заколками и украшениями для волос, одежды и другими предметами, которые могут нанести травму во время массажа
- ✓ использовать другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажером
- ✓ засыпать и спать с массажером
- ✓ пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой
- ✓ извлекать шнур питания из розетки во время сеанса массажа
- ✓ пользоваться массажером при грозе и молнии

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности

Массажер не предназначен для медицинского, коммерческого и общественного использования.

Массажер предназначен только для взрослых. Использование массажера лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.

Массажер снабжен функцией прогрева, поэтому особое внимание при его работе следует уделять людям с повышенным или наоборот, с полным отсутствием чувствительности тела.

Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с врачом.

Во избежание дискомфорта, не используйте массажер сразу после еды.

Избегайте попадания посторонних предметов, конечностей, волос и одежды в механические части массажера во время его работы.

Используйте адаптеры питания только из комплекта поставки.

Не перемещайте массажер при помощи шнура питания или используя его как ручку.



Если массажер не используется, выключите его и извлеките вилку адаптера питания из розетки.

Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

Если из массажера слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.

Рекомендуемое время использования массажера — 15 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Перерыв между сеансами должен составлять не менее 30 минут.

ОПИСАНИЕ

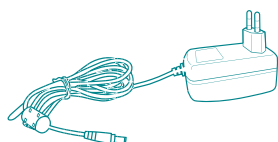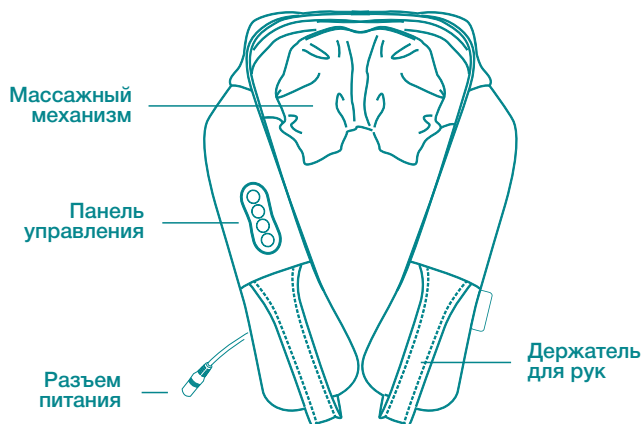

Адаптер питания
для электросети 220В



Адаптер питания
для автомобиля 12В

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Подсоедините штекер адаптера питания к разъему питания массажера, вставьте вилку адаптера питания в розетку

Нажмите «Вкл/Выкл», начнется разминающий массаж с функцией нагрева

Нажмите «Нагрев», чтобы отключить функцию нагрева, продолжая при этом разминающий массаж

Нажмите «Режим», чтобы выбрать 1 из 2 автоматических режимов массажа

Нажмите «Скорость», чтобы выбрать высокую или низкую скорость массажа

Нажмите «Вкл/Выкл», чтобы выключить массажер и все его функции

Примечание: каждый сеанс массажа длится 15 минут, после чего массажер автоматически выключится.

После использования извлеките вилку адаптера питания из розетки.

Варианты применения массажера:



ШЕЯ



СПИНА И ПЛЕЧИ



БЕДРА И ГОЛЕНИ



ПОЯСНИЦА



ЖИВОТ



СТУПНИ

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой массажера убедитесь, что он выключен, а вилка адаптера питания отсоединена от розетки.

Чистите только внешнюю часть массажера мягкой сухой тканью, аккуратно протирайте ей поверхность массажера, панель управления, провода и корпус адаптера питания.

Внимание! При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажера и повредить его. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

Рекомендуется хранить массажер в оригинальной упаковке, в недоступном для детей, в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Перед каждым использованием массажера, убедитесь, что: отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки), не нагревается шнур питания, отсутствуют другие нетипичные признаки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажера. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции массажера	Это может быть звук мотора, механических частей массажера или звук трения массажного механизма о покрытие	Это нормальная работа массажера, не является неисправностью
Массажер не работает	Вилка адаптера питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку адаптера питания в розетку, проверьте все соединения
	Штекер шнура питания не подсоединен к разъему питания	
	Закончилось время сеанса массажа	Включите массажер и запустите новый сеанс массажа
Массажер очень горячий	Слишком долгая непрерывная работа массажера	Выключите питание и дайте массажеру остыть не менее 30 минут перед следующим использованием

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: массажер для шеи и плеч

Модель: Wolken

Напряжение: AC100-240V/50-60Hz

Мощность: 30W

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажера «Bodo» дилером в течение 1 года со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и естественный износ.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить изделие на новое, адекватное по стоимости неисправному изделию на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт изделия производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки изделия в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец изделия.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: _____

Компания-продавец: _____

Адрес продавца: _____

Телефон продавца: _____

ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.

Претензий не имею.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)