


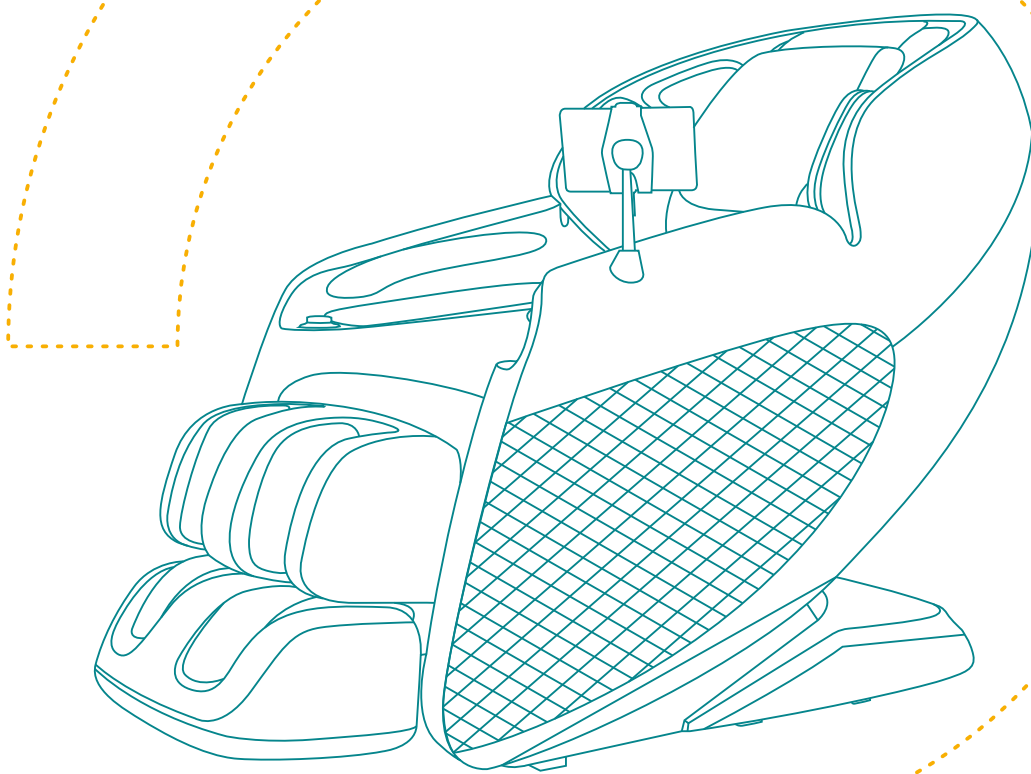

МАССАЖНОЕ
КРЕСЛО

Beetle

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Beetle**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	6
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	8
ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	9
СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА	10
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	11
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	13
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	13
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	17
УХОД И ХРАНЕНИЕ	18
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ	20
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	22

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного кресла.

Инструкции по технике безопасности содержат разделы «ВНИМАНИЕ», «ЗАПРЕЩЕНО» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - это очень важные предостережения по безопасности, уделите им особое внимание!



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
 - ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
 - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
 - ✓ страдаете ожирением, хроническими заболеваниями сердца и повышенным кровяным давлением
 - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
 - ✓ страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника
 - ✓ страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое телосложение
 - ✓ при онкологии
 - ✓ при парестезии
 - ✓ при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате
 - ✓ при тендовагините и остеопорозе
 - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
 - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
 - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
 - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
 - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Использование массажного кресла лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственным за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Убедитесь в исправности электрической сети и розетки, что их мощность достаточна для работы массажного кресла. Неправильный выбор электропитания может привести к нагреву электрического кабеля, розетки или даже к возгоранию. Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а также класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
- Вставать на кресло во время массажа.
- Перемещать работающее кресло.
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности



- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 120 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла — 20 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5 минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания рук или ног между массажными роликами и в пространство между механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Массажное кресло хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.
- Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.
- Транспортировка массажного кресла осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажное кресло — это механическое устройство бытового назначения для использования дома или в офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа. Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Устройство совмещает в себе кресло для сидения и механизмы, приводящиеся в движения различными способами и осуществляющие контакт с телом человека путем массирования участков тела.

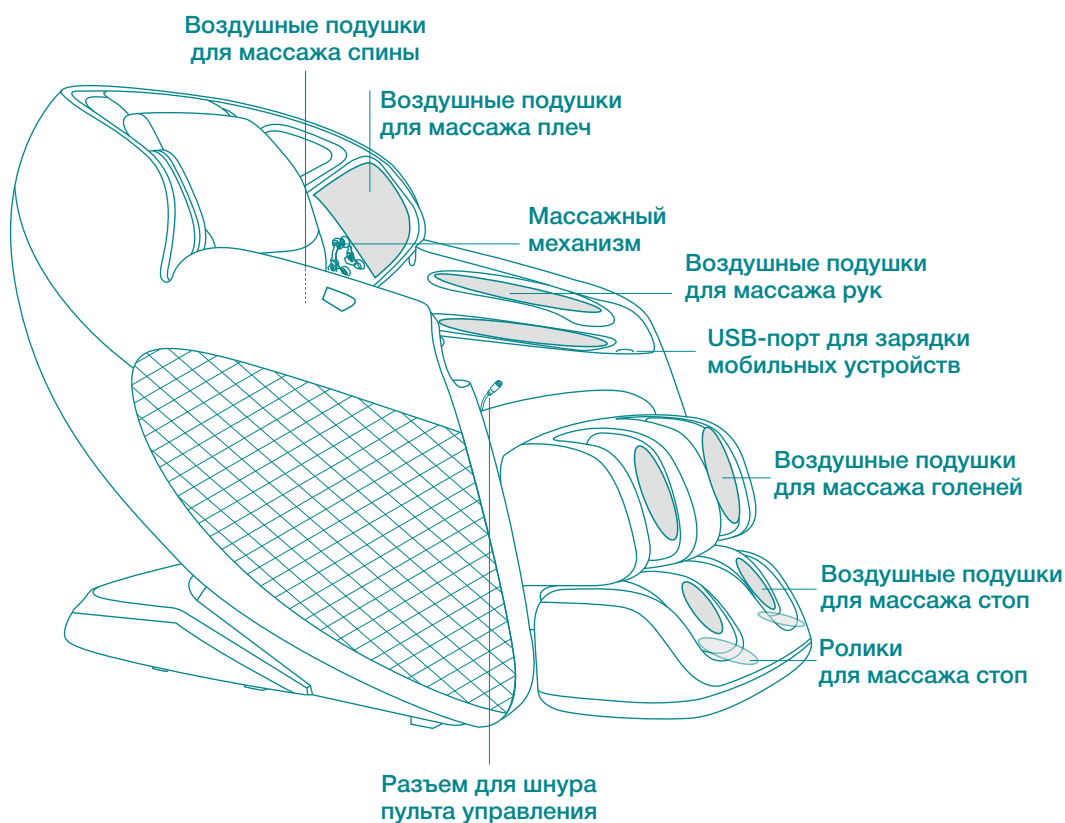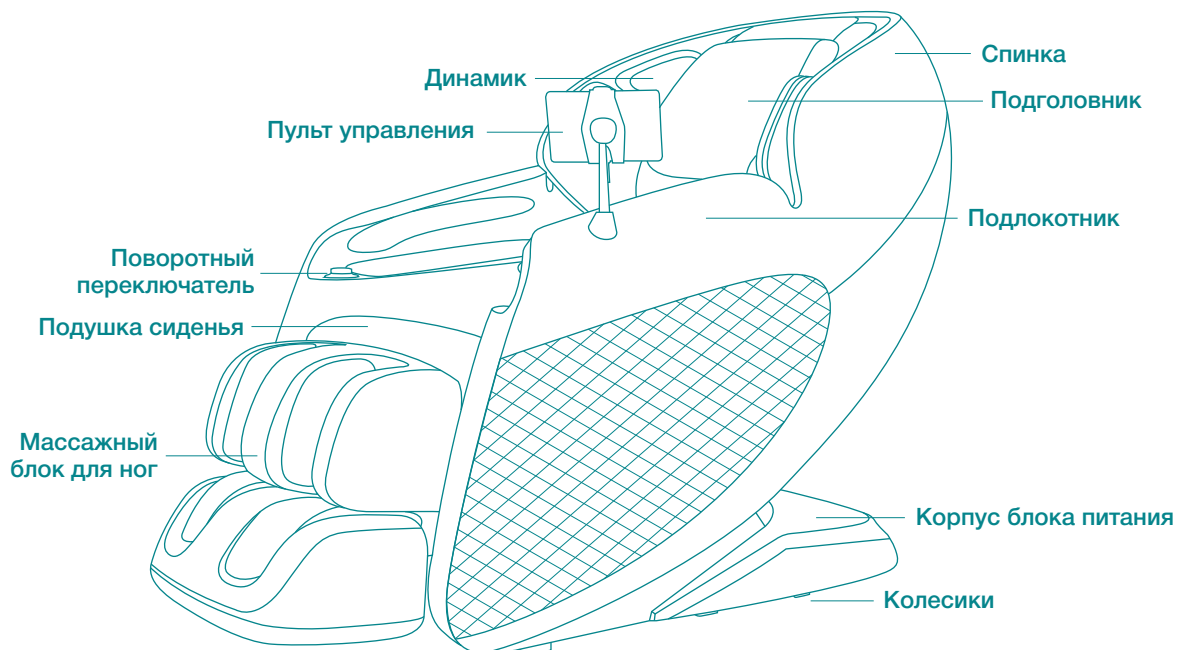


Шаг 1

С помощью двух и более человек аккуратно достаньте массажное кресло из коробки, удерживая его за основание спереди и за спинку сзади, поставьте на ровную поверхность. Делайте это медленно и осторожно во избежание повреждений. Достаньте остальные комплектующие из коробок. Кресло комплектуется набором для сборки. Проверьте комплектность.

Шаг 2

Опустите массажный блок для ног.

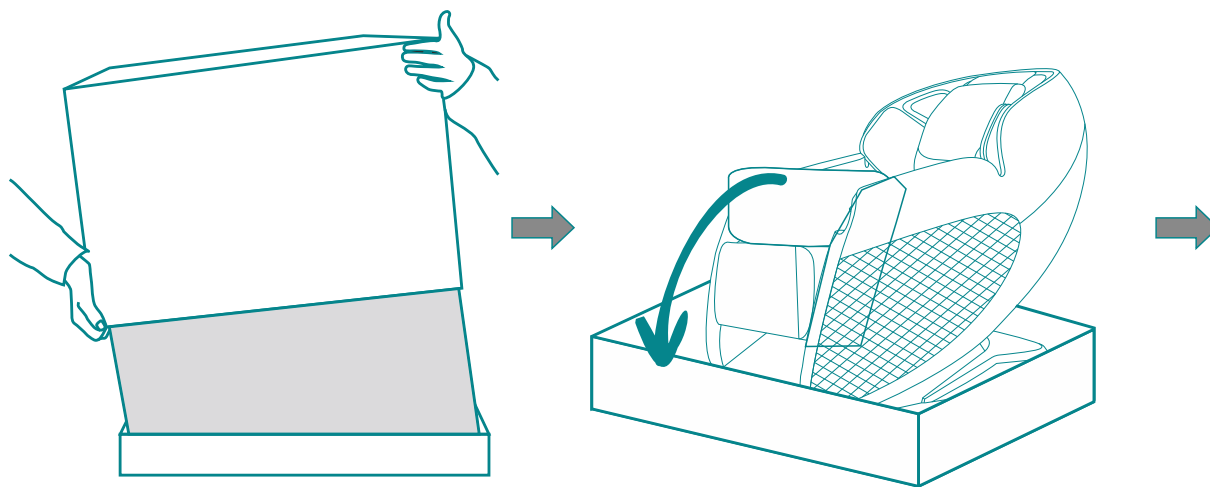


Шаг 3

Снимите защитную резиновую заглушку резьбы держателя пульта управления в специальном гнезде левого подлокотника. Установите держатель пульта управления в гнездо и вращайте по часовой стрелке, чтобы его зафиксировать. Поместите пульт управления в держатель. Вставьте штекер шнура пульта управления в соответствующий разъем на внутренней стороне левого подлокотника.

Шаг 4

Вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания сзади кресла. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

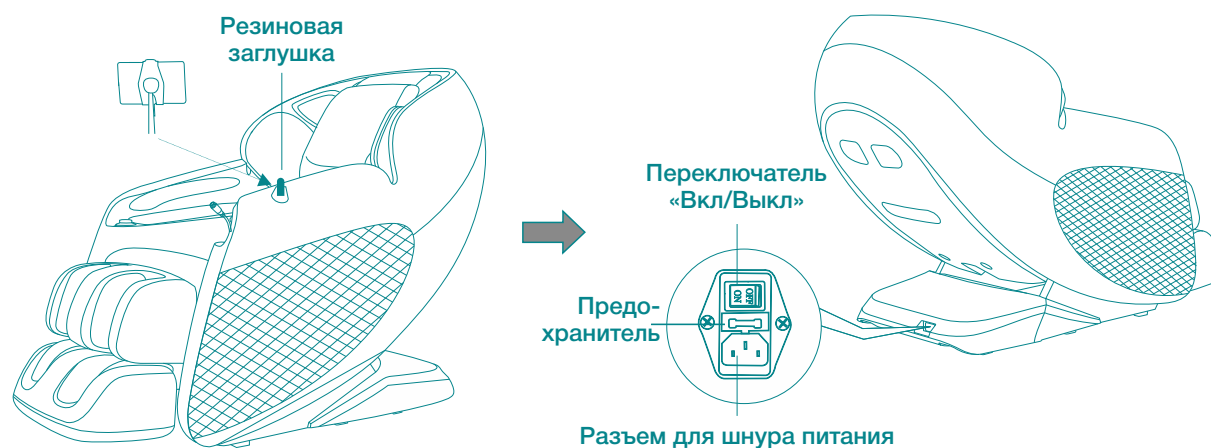


Массажное кресло оборудовано колесиками в нижней части для перемещения.

Максимально поднимите спинку кресла.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания и пульта управления на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла вам необходимо его сначала наклонить и поставить на колесики при помощи двух и более человек.


Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите кресло с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

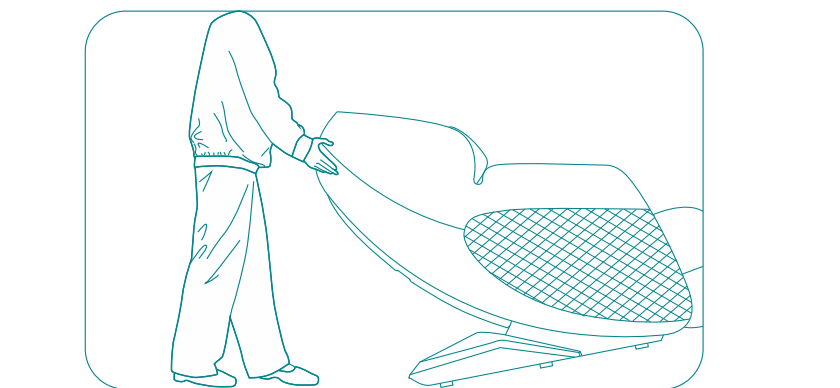

ВНИМАНИЕ



- Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью трех или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку в задней части.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») перед подключением кресла к электросети.

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство (не менее 16 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 30 см впереди кресла). Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

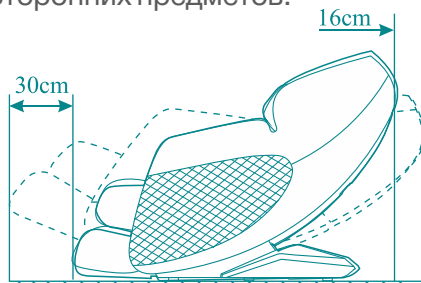

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.

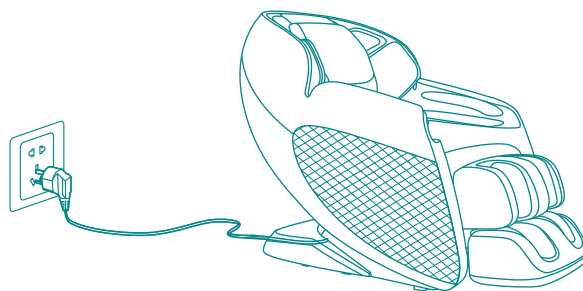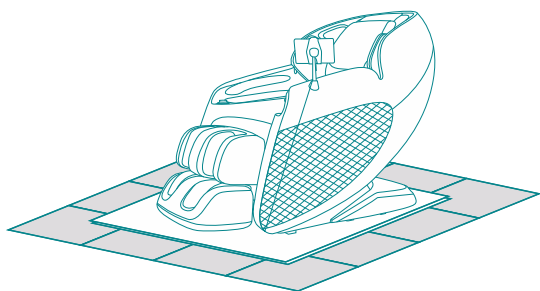

Включите питание массажного кресла, нажав на переключатель «Вкл/Выкл» в положение «I». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, выберите необходимую программу массажа и ее длительность.




ВНИМАНИЕ

- Избегайте попадания конечностей и прочих предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а также в пространства между механическими частями кресла во время его работы.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения

После использования выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «O») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.

Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.

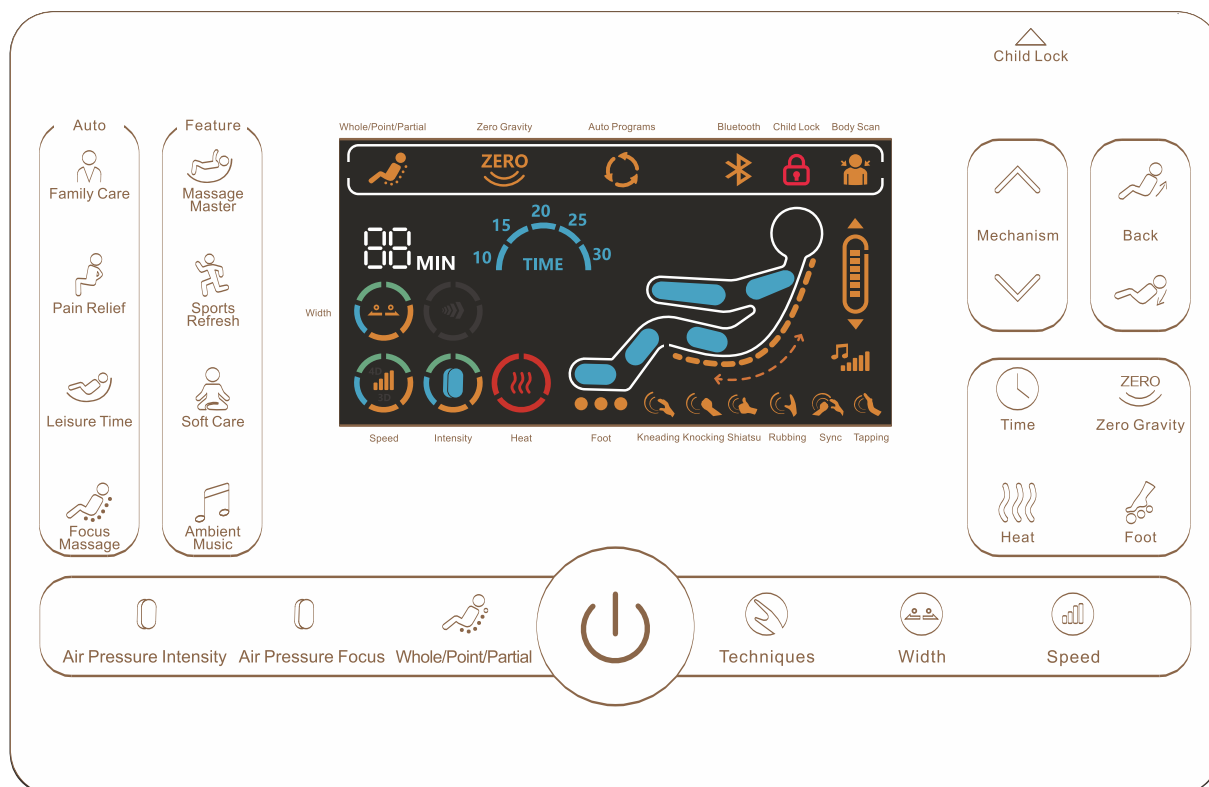

ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ



Кнопка «Вкл/Выкл» — включает и выключает все функции массажного кресла

Когда кресло подключено к электросети, нажмите и удерживайте эту кнопку – включится ЖК-дисплей, кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных точек и позиции плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, вы можете вручную изменить и настроить их позицию с помощью кнопок со стрелочками «Вверх» или «Вниз». После регулировки запустится автоматическая программа массажа «Massage Master» длительностью 20 минут.

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы выключить массажное кресло. Массаж прекратится, все массажные ролики, спинка кресла и массажный блок для ног вернутся в свое исходное положение.



Кнопки «Вверх» и «Вниз»

Нажмите и удерживайте кнопку со стрелочкой «Вверх» или «Вниз», чтобы переместить массажный механизм в нужное положение.



Air Pressure Intensity

Настройка интенсивности воздушно-компрессионного массажа

Выберите 1 из 5 уровней интенсивности воздушно-компрессионного массажа.



Air Pressure Focus

Настройка зоны для воздушно-компрессионного массажа

Запустите воздушно-компрессионный массаж всего тела, только в верхней или нижней части, или полностью выключите его.



Whole/Point/Partial

Настройка зоны для роликового массажа

Позволяет в ручном режиме изменить настройку, чтобы запустить массаж всего тела, в определенной области тела или точке. Изменяйте позицию массажного механизма с помощью кнопок со стрелочками «Вверх» или «Вниз».



Techniques

Настройка техники массажа

В ручном режиме измените настройку, чтобы переключиться между массажными техниками «Kneading» (разминание), «Knocking» (поколачивание), «Shiatsu» (шиацу), «Rubbing» (растирание), «Sync» (разминание с поколачиванием), «Tapping» (постукивание).



Width

Настройка ширины массажных роликов

В ручном режиме измените расстояние между массажными роликами, выбрав широкий, средний или узкий охват. Настройка ширины массажных роликов недоступна для массажных техник «Kneading» (разминание), «Rubbing» (растирание), «Sync» (разминание с поколачиванием).



Speed

Настройка скорости роликового массажа

Выберите 1 из 5 скоростей движения массажного механизма.



Time

Настройка длительности сеанса массажа

Измените длительность сеанса массажа на 10, 15, 20, 25 или 30 минут.



Zero Gravity

Настройка позиции «нулевой гравитации»

Придайте массажному креслу 1 из 2 позиций «нулевой гравитации» или выключите ее.

Примечание: «нулевая гравитация» – это особый режим работы массажного кресла, при котором тело принимает максимально комфортное положение для расслабления, при этом усиливается массажный эффект. Голова и ноги находятся практически на одном уровне, при этом расположены под определенным углом – в таком положении нагрузка равномерно распределяется по всему телу, и оно максимально расслаблено.



Heat

Настройка функции прогрева

Выберите 1 из 3 уровней функции прогрева или полностью выключите ее.



Foot

Роликовый массаж стоп

Выберите 1 из 3 уровней скорости роликового массажа стоп или полностью выключите его.



Back

Настройка угла наклона спинки кресла

Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку, чтобы поднять или опустить спинку кресла. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение.



Функция «Child Lock»

Функция «Child Lock» блокирует пульт управления массажного кресла от нажатия кнопок детьми. Данная функция по умолчанию выключена. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, для блокировки/разблокировки пульта управления.



Поворотный переключатель

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» поворотного переключателя, чтобы включить или выключить массажное кресло. Короткое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» переключает автоматические программы массажа. Настройте угол наклона спинки кресла, поворачивая переключатель по часовой или против часовой стрелки.



Family Care

Программы для всей семьи «Family Care»:

«Queen Slimming» - персональная программа массажа для тех, кому нравится более легкая степень воздействия на тело. Представляет собой специально подобранные массажные техники для расслабления и комфорта вашего тела. Массаж способствует улучшению обмена веществ в организме.

«Man's Massage» - данный массаж больше подойдет мужчинам. Здесь используются рекомендуемые техники массажа более интенсивного воздействия на тело, чтобы облегчить мышечные боли, расслабить зажатые мышцы, освежить тело и разум.

«Senior's Joy» - программа массажа специально разработана для людей зрелого возраста. Здесь используются супер мягкие и медленные техники массажа, помогающие расслабиться и очистить энергетические меридианы.



Pain Relief

Программы для снятия усталости «Pain Relief»:

«Neck & Shoulder» - программа использует специальные разминающие техники, шиацу, вытягивающий массаж и растяжение, чтобы облегчить боль и скованность в области шеи и плеч.

«Waist & Hip» - этот роликовый массаж сконцентрирован на глубоких тканях талии и бедер, чтобы расслабить и успокоить чрезмерный тонус мышц и снять с них напряжение.

«Back & Spine» - используется комбинация техник глубокого массажа тканей и фокусируется на мышцах вдоль позвоночника, верхней и нижней части спины, а также поясничного отдела.



Leisure Time

Программы для восстановления «Leisure Time»:

«Game Mode» - подходит для наслаждения массажем в свободное время, перерывах на работе или между другими занятиями, чтобы снять напряжение.

«Coffee Mode» - проведите сеанс массажа вместо кофе-брейка. Ненавязчивые массажные техники, чтобы привести затекшие мышцы в норму при малоподвижном времяпрепровождении.

«Nap Mode» - подходит для релакса и полного расслабления, такой массаж снимет малейшее напряжение, улучшит пищеварение и освежит тело от усталости.



Сфокусированные программы «Focus Massage»:

Нажмите эту кнопку для переключения между программами сфокусированного массажа в области шеи, плеч, спины, талии, бедер или массажа ног.

«**Neck massage**» - способствует облегчению боли в шее. Уникальные техники разминаний и растяжения могут эффективно снизить усталость и скованность этой части тела.

«**Shoulder massage**» - предназначен для обретения легкости в области плеч. Используются уникальные техники разминания и постукивания, чтобы снять усталость, излишний тонус мышц и, тем самым, облегчить или даже устранить боль в плечах.

«**Back massage**» - следуя по S-образному изгибу позвоночника, программа массажа использует комбинацию техник прокатывания, сжатия и надавливания, чтобы помочь снять напряжение мышц и общую усталость.

«**Waist massage**» - очень комфортный воздушно-компрессионный массаж в сочетании с разминающими и другими техниками массажа в области поясницы и талии поспособствуют гибкости и здоровому тону этой зоны, а также сжиганию жира.

«**Hip massage**» - помогает улучшить кровообращение в области бедер, которое из-за малоподвижного образа жизни со временем ухудшается. Используя техники разминания, шиацу и синхронного разминания с поколачиванием, может формировать и тонизировать мышцы этой зоны.

«**Leg massage**» - специальные методы разминания, поколачивания и постукивания улучшат кровообращение, простимулируют лимфоток, уменьшать боль в ногах, что ускорит восстановление самочувствия всего тела.



Программа «Massage Master»

Массаж с умеренной интенсивностью эффективно способствует восстановлению тела и избавлению от усталости. Эксклюзивные техники массажа помогут облегчить различные неприятные ощущения, такие как боли в шее при долгом сидении, боли и скованность в плечах, талии и спине. В сочетании с легкой музыкой, вы можете помедитировать и расслабить ум, после чего от усталости не останется следа.



Программа «Sports Refresh»

Помогает погрузить все тело в релакс. Эффективно облегчит мышечную боль в области шеи и плеч, спине, талии, в ногах, снимет дискомфорт после тренировки, растянет мышцы, снимет общую усталость тела.



Программа «Soft Care»

В сочетании с ритмичным покачиванием, программа массажа поможет расслабить тело, улучшить кровообращение, успокоить разум, эффективно справиться с неприятным состоянием при недостатке сна (вялость, замедленная реакция, головная боль и плохая усидчивость). Напряжение вас покинет и настроение улучшится.



Функция «Ambient Music»

Когда запущена автоматическая программа массажа, нажмите эту кнопку, чтобы выключить музыку в стиле Эмбиент (переводится как «обволакивающая»), по умолчанию она включена. Короткое нажатие кнопки переключит громкость музыки (1 из 3 уровней) или выключит музыку. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить/включить голосовые оповещения.

Примечание: успешное Bluetooth сопряжение с мобильным телефоном или планшетом возможно с поддержкой функции Bluetooth в этих устройствах и под управлением операционной системы Android или iOS. После сканирования доступных Bluetooth устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом. После успешного сопряжения вы сможете слушать свою любимую музыку во время массажа через динамики кресла.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для использования функции голосового управления массажным креслом, сначала активируйте ее фразой: «Hello my masseur». Услышанное в ответ: «Please say voice command» будет означать, что функция голосового управления и распознавания речевых команд активирована, кресло готово принимать команды голосом.

Каждой голосовой команде пользователя соответствует голосовой ответ от кресла о статусе выполнения команды.

Голосовые команды произносятся на английском языке, произносите команды четко и без ошибок.

Примечание: при озвучивании голосовой команды динамик кресла дает обратную связь с небольшой задержкой, после ответа можно произносить следующую команду.

Голосовая команда	Голосовой ответ
Hello my masseur	Please say voice command
Power on	OK, Power on
Power off	OK, Power off
Massage Master	OK, Massage Master
Sports Refresh	OK, Sports Refresh
Soft Care	OK, Soft Care
Family Care	OK, Family Care
Pain Relief	OK, Pain Relief
Leisure Time	OK, Leisure Time
Focus Massage	OK, Focus Massage
Change a program	OK, Change a program
Music on	OK, Music on
Music off	OK, Music off
Sole massage on	OK, Sole massage on
Sole massage off	OK, Sole massage off

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
- Отсоедините чехлы (внутренние тканевые вкладки) массажного блока для ног и аккуратно постирайте вручную в теплой воде. Не отжимайте и не гладьте чехлы, сушите их только естественным образом.



ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.
- Срок хранения — не ограничен.

НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции кресла	Это может быть звук мотора, компрессора, механических частей кресла или звук трения массажного ролика о покрытие	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Кресло не включается	Вилка шнура питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура питания в розетку. Проверьте все контакты.
	Не включен переключатель «Вкл/Выкл»	Нажмите на переключатель «Вкл/Выкл» (в положение «I»)
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на аналогичный по параметрам
Отсутствует звук из динамиков	Уровень громкости звука установлен на минимальном значении	Увеличьте уровень громкости звука
Массажный блок для ног или спинка кресла не поднимается или не опускается	Имеются помехи и препятствия при складывании или раскладывании кресла	Устраните препятствия и чрезмерное давление на спинку кресла или массажный блок для ног
	Массажный блок для ног или спинка кресла перегружены	
Воздушные подушки не надуваются	Заблокированы воздуховоды	Почистите воздуховоды
	Не подсоединены воздушные трубки к соплам	Подсоедините воздушные трубки к соплам

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: массажное кресло

Название модели: Beetle

Напряжение: AC220-240V/50-60Hz

Мощность: 100W

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами!

Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона.

За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Bodo» дилером в течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____
Наименование товара: _____
Компания-продавец: _____
Адрес продавца: _____
Телефон продавца: _____
ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
Претензий не имею.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)